

FICHE TECHNIQUE V3.00 du 16/09/2014	CHIFFONNETTES HYDRATEES EAU PEPTONEE TAMPONNEE+ NEUTRALISANTS A 10 % 0070120	
--	---	---

I EMBALLAGE :

Quantité par boîte : 100 chiffonnettes (10 enveloppes de 10 chiffonnettes)
Taille poche : 18 x 28 cm
Carton : BTE-3070-IM


II TRACABILITE :

- Informations présentes sur la boîte :
Référence du produit,
N° de lot,
N° de stérilisation,
Quantité présente : 10 enveloppes de 10 chiffonnettes.
- Informations présentes sur l'enveloppe :
N° de lot,
N° de stérilisation.

III PRODUIT :

- Le sac :

Matières : LDPE contact alimentaire autorisé
Taille : 18 x 30 cm
Epaisseur : 76 µm +/- 10%
Pré-découpé : facile à déchirer des deux côtés , à 1,2 cm du haut.
Scellé : scellé de ¾ " ou double scellé en bas
Refermable par languette métallique.
Zone de marquage pré imprimé bleu 10 x 12 cm

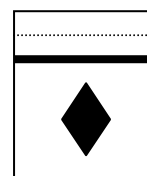

- La chiffonnettes :

Tissus non tissé polyester / cellulose bleu
Non faite de matériaux recyclés
Très absorbante et résistante
Ne peluche pas
Taille : 23 x 23 cm, Epaisseur 1/64"

- La solution :

Volume : 13 ml
Eau peptonée tamponnée additionnée à 10% de solution neutralisante de désinfecteur stérile
pH finale : 7,2 ± 0,2

Solution neutralisante :

- Lecithine de soja : 3 g (Composés phénolés, iode, acides organiques, esters..)
- Tween 80 : 30 g (Composés phénolés, iode, acides organiques, esters..)
- L-Histidine : 1g
- Sodium thiosulfate : 7,8 g (Composés halogénés)
- Phosphate di-sodique anhydre : 39.9 g
- Eau distillée qsq 1000 ml

- Irradiation :

15 Kgy minimum

- Stockage :

Conserver à la température ambiante jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage