

<b>FICHE TECHNIQUE</b>  V1.00 du 03/03/2016	<b>CHIFFONNETTES HYDRATEES TRYPTONE SEL + NEUTRALISANTS A 10 %</b>  <b>0081012</b>	
--	--	---

### I EMBALLAGE :

**Quantité par boîte :** 100 chiffonnettes ( 10 enveloppes de 10 chiffonnettes )

**Taille poche :** 18 x 28 cm

**Carton :** .....

### II TRACABILITE :

- Informations présentes sur la boîte :

Référence du produit,

N° de lot,

N° de stérilisation,

Quantité présente : 10 enveloppes de 10 chiffonnettes.

- Informations présentes sur l'enveloppe :

N° de lot,

N° de stérilisation.

### III PRODUIT :

- **Le sac :**

Matières : LDPE contact alimentaire autorisé

Taille : 18 x 30 cm


Epaisseur : 76 µm +/- 10%

Pré-découpé : facile à déchirer des deux côtés , à 1,2 cm du haut.

Scellé : scellé de ¾ " ou double scellé en bas

Refermable par languette métallique.

Zone de marquage pré imprimé bleu 10 x 12 cm

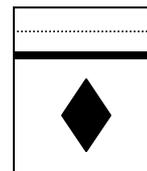

- **La chiffonnettes :**

Tissus non tissé polyester / cellulose bleu

Non faite de matériaux recyclés

Très absorbante et résistante

Ne peluche pas

Taille : 305 x 340 mm, Epaisseur 1/64"

- **La solution :**

Volume : 25 ml

Tryptone sel tamponnée additionnée à 10% de solution neutralisante de désinfecteur stérile

pH finale : 7.2....

Solution neutralisante :

➤ Lecithine de soja : 3 g ( Composés phénolés, iode, acides organiques, esters..)

➤ Tween 80 : 30 g (Composés phénolés, iode, acides organiques, esters..)

➤ L-Histidine : 1g

➤ Sodium thiosulfate : 7,8 g ( Composés halogénés )

➤ Phosphate di-sodique anhydre : 39.9 g

➤ Eau distillée qsq 1000 ml

- **Irradiation :**

15 Kgy minimum

- **Stockage :**

Conserver à la température ambiante jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage