


**TEST DE SENSIBILITE AMMONIUM QUATERNAIRE QR5
0-500PPM BTE 100**

Référence

0299042

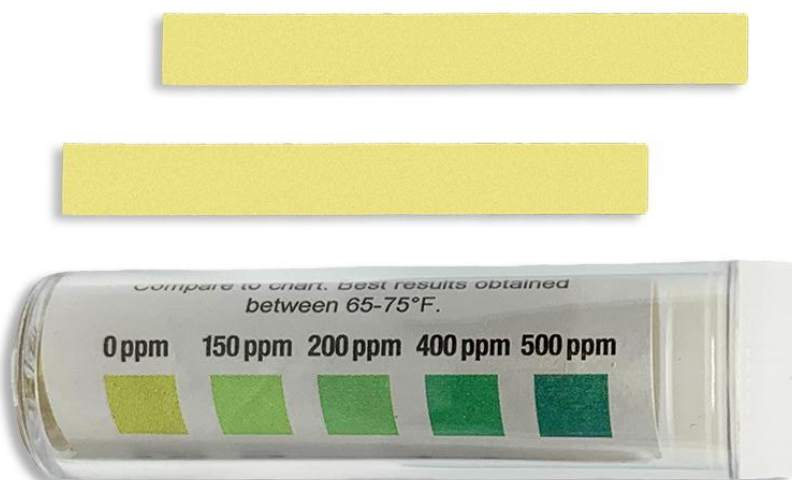

Retirez un papier test du flacon en veillant à ne toucher la bandelette qu'au niveau de la prise du bout des doigts.
Trempez environ 2,5 cm de papier test dans la solution à tester pendant 1 seconde.
Laissez le test se développer 5 à 10 secondes, puis comparez-le au nuancier.

REMARQUE : Les bandelettes doivent être conservées dans des flacons fermés lorsqu'elles ne sont pas utilisées, à l'abri de la lumière directe du soleil et à température ambiante.

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299042

août 25