



MEUBLES SOUS EVIER GROSSERON COLLECTION

VISUEL

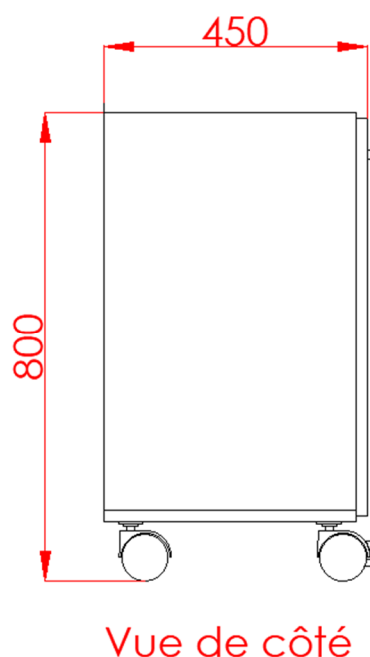

COUPES—DETAILS

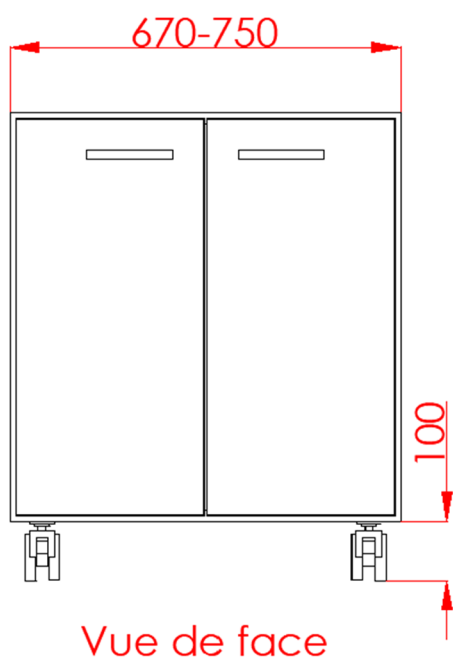

DESSCRIPTIF

Meuble sous paillasse Grosseron Collection à roulettes réalisé en mélaminé CTBH épaisseur 19mm.

Deux portes battantes montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.

1 étagère, réglable tous les 32mm sur crémaillères avec taquets métalliques

Les poignées des portes sont en PVC gris. Les portes sont recouvertes sur leurs chants d'un PVC coloris Gris Aluminium.

Les 4 roulettes sont en polyamide noire montées sur axes métal (2 sont équipées de freins)

DIMENSIONS

Profondeur 45cm x hauteur 80cm x longueurs 67cm, 75cm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON

POSSEME / GRM67SE—GRM75SE

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*