

MEUBLES MURAUX GROSSERON COLLECTION

VISUEL



DESCRIPTIF

Meuble mural à porte battante (ouverture tirant droit).

Il est réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur.

La porte est montée sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.

Une étagère réglable tous les 32 mm sur crémaillères avec taquets en métal.

Les poignées sont réalisées en PVC blanc. Les champs des meubles sont colorés en gris aluminium.


DIMENSIONS

Profondeur 35cm x hauteur 62cm x longueurs 60cm


MARQUE / REFERENCE GROSSERON

POSSEME / GRMUR60

COUPES—DETAILS

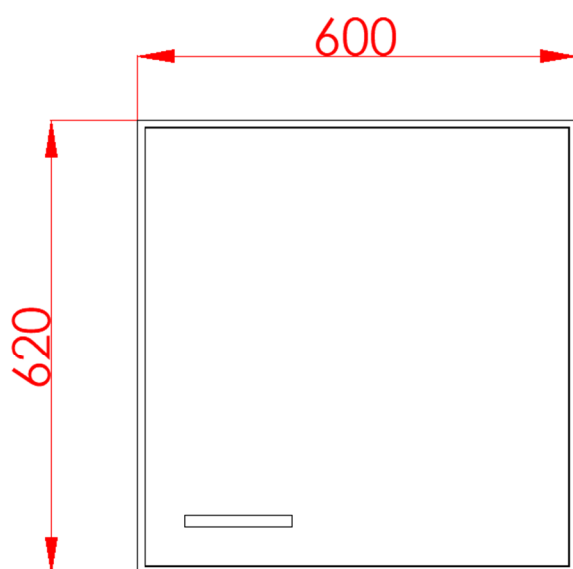

Vue de face

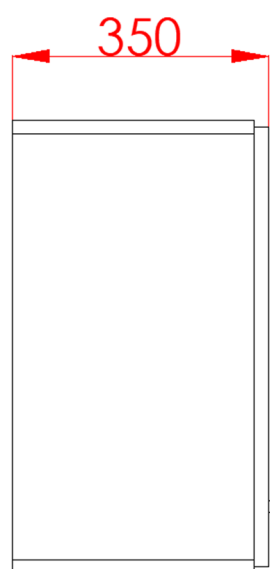

Vue de côté

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*