



PROMOTION

du 1er septembre 2025 au 9 janvier 2026

asecos®



15% de remise déjà déduite*

** sur toutes les armoires et caissons de ventilation de la gamme asecos, quelque soit la configuration intérieure.*

Sélection

Édition 10

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX



COMPARAISON ENTRE ARMOIRES



Stockage de produits inflammables

**INCOMPATIBLE
CONTENEURS DE SÉCURITÉ
REQUIS**

Isolation

AUCUNE ISOLATION

Certification

AUCUNE

Résistance au feu (en minutes)



Risque de sinistre

TRÈS ÉLEVÉ

Conséquences légales
et responsabilité personnelle



AUCUNE SÉCURITÉ



**COMPATIBLE
CONTENEURS DE SÉCURITÉ
RECOMMANDÉS**

ISOLATION À L'AIR

**CERTIFICATION PAR DES TIERS
(FM 6050, UL 1940
OU SIMILAIRE)**

10

MOYEN



**RECOMMANDÉ
AUCUNE RESTRICTION**

**PANNEAUX RÉSISTANTS
AU FEU**

EN 14470-1

30

FAIBLE

90

AUCUN

ENGS FM



SÉCURITÉ MAXIMALE

GRANDE VARIÉTÉ D'ARMOIRES

Les produits chimiques sont multiples et possèdent généralement de nombreuses propriétés distinctes. Qu'ils soient dangereux pour l'environnement, gazeux, toxiques ou inflammables : en tant que premier fabricant mondial d'armoires de sécurité conformes à la norme européenne EN 14470-1/-2, asecos dispose de l'armoire adéquate pour un stockage sûr

et conforme à la législation. Nos solutions personnalisées sont mises en œuvre dans l'agriculture, la recherche, l'industrie des laboratoires, etc..

LES ARMOIRES INDÉPENDANTES

des gammes Q et S-LINE ont fait leurs preuves dans le stockage des matières dangereuses inflammables. Avec le système de verrouillage de porte, la fermeture automatique (TSA) et la commande à une main (AGT), elles assurent le meilleur confort d'utilisation possible.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS PAILLASSE

Elles s'adaptent parfaitement aux sorbonnes ou aux tables de travail et permettent des processus de travail efficaces et ergonomiques. Elles sont également parfaitement adaptés aux systèmes de recyclage

ARMOIRES POUR BATTERIES

Elles permettent de stocker en toute sécurité les batteries lithium-ion et de protéger les zones des bâtiments alentours contre l'emprise des flammes en cas d'emballage thermique. Disponible en option avec une fonction de charge intégrée pour les batteries.

ARMOIRES POUR ACIDES ET BASES

Elles assurent un stockage sécurisé des matières corrosives, non inflammables et dangereuses dans le respect des réglementations. Les panneaux spéciaux recouverts de mélamine à haute résistance font de la ligne de modèles un produit de haute qualité et durable.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ AVEC TIROIRS VERTICAUX

Elles font des merveilles dans l'espace en laboratoire. Avec une grande profondeur d'armoire, elles exploitent l'espace jusque-là vide - par analogie avec la sorbonne. La technologie du tiroir vertical offre une vue d'ensemble et un accès optimal à toutes les matières dangereuses stockées, et des deux côtés.

ARMOIRES POUR BOUTEILLES DE GAZ

Elles offrent à l'utilisateur la possibilité de choisir entre une alimentation en gaz centrale et une distribution décentralisée en termes de mise en œuvre et de coûts.



ARMOIRES DE SÉCURITÉ AVEC SYSTÈME DE VENTILATION ET FILTRATION INTÉGRÉES

Elles sont disponibles pour quasiment toutes les matières dangereuses - inflammables, toxiques ou acides et bases. Tous les modèles ont en commun l'extraction et le filtrage des vapeurs dangereuses.

ARMOIRES POUR PRODUITS CHIMIQUES

pour un stockage sécurisé de matières toxiques, non inflammables et dangereuses dans les ateliers. Les modèles d'armoires sont disponibles en trois largeurs et deux hauteurs - pour une large gamme d'applications.

CAISSON DE SÉCURITÉ

Il convient pour un montage mural facile au-dessus des établis et des postes de travail. Le caisson de sécurité permet de stocker en toute sécurité les liquides inflammables, les bombes aérosols, etc.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ COMBINÉES

Elles sont séparées par une cloison horizontale ou verticale, selon la largeur de l'armoire. Cela permet de disposer de deux compartiments de stockage hermétiquement séparés pour stocker en toute sécurité les acides et les bases ainsi que les matériaux inflammables dans la même armoire. Une réaction commune aux différentes matières dangereuses est impossible.

ARMOIRES DE STOCKAGE ÉCOLOGIQUES

Elles conviennent pour le stockage sûr des liquides polluant l'eau et des pesticides dans les zones de travail. En les équipant de bacs de rétention, on évite les fuites de liquides polluants.

ARMOIRES DE STOCKAGE À FUTS

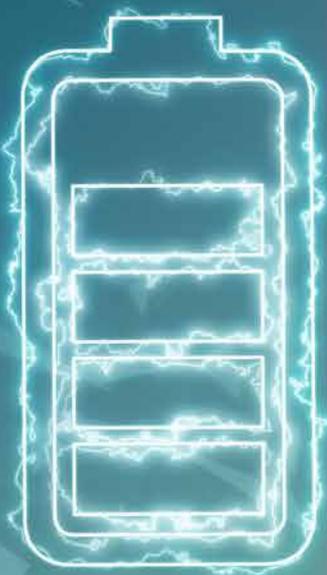
Elles sont les plus grandes parmi les armoires de sécurité. Elles sont conçues pour accueillir les grands conteneurs et les fûts de 200 litres.



asecos®

BATTERIES AU LITHIUM

STOCKAGE ET CHARGEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ



Batteries au lithium-ion

BATTERIES AU LITHIUM-ION – CE QUE LES EXPERTS ET LES ASSUREURS RECOMMANDENT SUR LA MANIPULATION DES BATTERIES

Les particuliers, les entreprises artisanales et les entreprises utilisent de plus en plus souvent des batteries au lithium-ion de la classe de puissance moyenne selon VdS 3103. Dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit la sécurité. Si vous ne stockez pas et/ou ne chargez pas ces batteries de manière appropriée, des dangers et des risques pour la sécurité peuvent se produire.

Les assureurs, les associations et les professionnels ont attiré l'attention sur ce sujet.

Les assureurs de biens conseillent d'utiliser les dispositifs de protection disponibles (par exemple les armoires de sécurité de type 90) afin de minimiser les risques et d'éviter ainsi les sinistres.

Les assureurs immobiliers recommandent l'utilisation d'armoires de sécurité pour les raisons suivantes :

« Si des batteries au lithium sont nécessaires sur des sites de production, des mesures et des mesures de sécurité doivent être envisagées, telles que (...) le stockage dans des armoires résistantes au feu »

IMK Ber. N° 192
Ingénieur diplômé Jürgen Kunkelmann
Chapitre 2.2 Situation en 10/2017

« Les batteries au lithium doivent être fondamentalement traitées comme des produits dangereux. »

Publication VdS 3103 : 2019-06 (03)
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg.
publié par VdS Schadenverhütung GmbH

« Les zones avec des batteries de puissance moyenne doivent être séparées des autres zones de manière (minimum 5 mètres) ou avec une construction résistante au feu. »

Publication VdS 3103 : 2019-06 (03)
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg.
publié par VdS Schadenverhütung GmbH

« Les armoires de sécurité résistantes au feu (type 90) avec surveillance par détecteur de fumée, dans lesquelles les accus peuvent être à la fois chargés et stockés en toute sécurité, offrent une protection particulière. »

Provinzial Flyer – E-Bikes Manipulation sûre du lithium, Situation en 06/2020

« L'expérience sur des sinistres a montré que des Batteries au Lithium-Ion endommagés ou défectueux, en particulier, peuvent provoquer des incendies. Des incendies dus à des accus lithium-ion ont également été enregistrés dans le commerce de vélos »

Provinzial – Manipulation sécurisée des accus aux ions lithium dans le commerce des vélos,
www.provinzial.de Situation en 05/2020

« Les grandes quantités ou les BLI puissantes doivent être stockées à une distance sûre des matériaux combustibles. En cas de stockage à l'intérieur de bâtiments, il convient de respecter un espace de dégagement de 2,5 m par rapport aux autres marchandises ou de stocker les BLI dans une zone séparée du point de vue de la protection incendie (p. ex. armoire de sécurité, conteneur) ! »

BLI= batteries au lithium-ion
Information DGUV 205-041
Prévention des incendies lors de la manipulation de batteries au lithium-ion
Situation en 02/2024

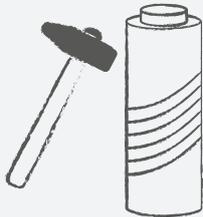
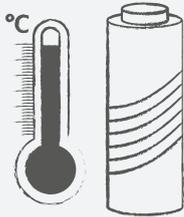
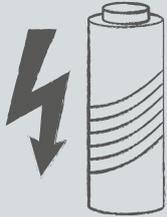
« Il est recommandé d'utiliser une armoire de sécurité pour le stockage et la charge à partir de 5 Batteries Lithium-Ion »

GDV – Brève information sur la prévention des dommages Situation en 09/2024

Batteries au lithium-ion

PLUS DE SÉCURITÉ GRÂCE À LA PROTECTION INCENDIE – CHARGER ET STOCKER CORRECTEMENT LES BATTERIES

Les batteries au Lithium peuvent générer un incendie. Les causes en sont :


Endommagement mécanique	Décharge profonde	Surcharge thermique	Surcharge électrique
en combinaison avec la densité énergétique élevée de la batterie	Cellule instable	par des sources externes de chaleur et d'énergie	lors de la recharge et de la décharge
			

Stockez et chargez toujours les batteries au lithium-ion dans une armoire de sécurité. Utilisez et manipulez correctement les batteries afin de réduire les risques, notamment d'incendie.

Les batteries au lithium-ion offrent de nombreux avantages. Elles ont une longue durée de vie, disposent d'une densité énergétique élevée, ne se déchargent que faiblement d'elles-mêmes et permettent les applications les plus diverses. Utiliser des batteries au lithium-ion est sans danger. Mais selon la VDE, cela n'est valable que si vous les manipulez correctement.

Des défauts techniques ou une mauvaise

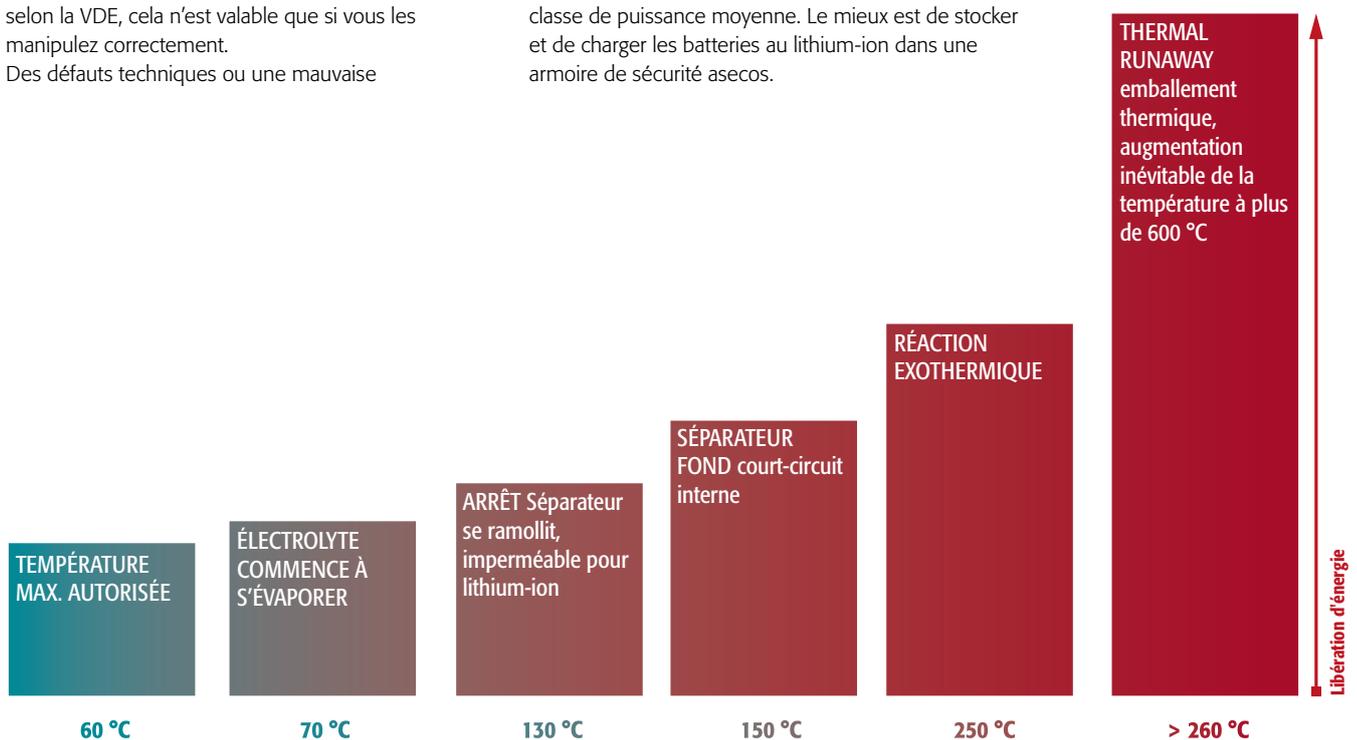manipulation peuvent provoquer un incendie. En effet, si une batterie lithium-ion libère son énergie de manière incontrôlée, il est possible que la chaleur libérée dépasse le point de fusion du lithium. Il en résulte une réaction en chaîne. Les spécialistes appellent cela le « Thermal Runaway », c'est-à-dire le passage thermique des cellules de la batterie. L'accumulateur peut alors brûler et même de manière explosive. Il est donc important de connaître et de respecter les règles de sécurité pour les batteries de classe de puissance moyenne. Le mieux est de stocker et de charger les batteries au lithium-ion dans une armoire de sécurité assecos.



STOCKAGE DES BATTERIES LITHIUM-ION

ARMOIRE ASECOS ION-CORE-90 POUR LE STOCKAGE PASSIF ET ACTIF DES BATTERIES LITHIUM



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14 470-1
- > Stockage sécurisé passif

Cette armoire est utilisée pour le stockage et la recharge des batteries Lithium.

Nouvelle génération d'armoire ION-Line d'ASECOS.

Elle est composée d'une armoire avec des blocs prises résistants au feu pour le chargement et stockage des batteries (CORE CHARGE) et d'une armoire uniquement de stockage (CORE STORE).

Robuste et durable : corps extérieur stable, de grande qualité et anti-rayure avec surface de structure à revêtement par poudre, fixation de porte triple, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de l'espace de stockage.

Ergonomique : Nouveau système d'ouverture et de fermeture de portes. Une seule poignée pour ouvrir les 2 portes. Ouverture réalisable avec une seule main. Fermeture sécurisée et renforcée en deux points en haut et en bas permettant une meilleure étanchéité en cas d'explosion de batterie lithium dans l'armoire en évitant l'entrée d'oxygène à l'intérieur de l'armoire.

Fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile.

Portes verrouillables avec cylindre profilé.

Transport facile : socle de transport intégré pour le transport interne, plinthe disponible en option.

Installation aisée : pieds réglables intégrés pour la compensation des irrégularités du sol.

Ventilation et aération de l'air ambiante : La ventilation se fait du bas vers le haut pour suivre la circulation de l'air et de la chaleur qui monte dans l'armoire.

Un clapet d'air sur le dessus de l'armoire permet par décompression de diminuer en cas d'incendie la pression dans l'armoire.

Pour un gain de volume utile dans l'armoire, le bac de rétention a été réduit.

Stockage sécurisé actif et recharge sûre : Détecteur de fumée, capteur de température intégrés pour la détection des incendies et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.

L'armoire est équipée en usine d'une alarme contact sec que nous recommandons de connecter au réseau électrique du bâtiment (en option, possibilité d'avoir un relais ou un module de signalisation à distance de transmission des alarmes).

Pour la version Core Charge, le chargement des batteries se fait via des prises résistantes au feu.

Protection totale : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur (DIN EN 1363-1).

Équipements intérieur disponibles suivant les modèles:

- Étagères grillagées pour charge lourde réglables en hauteur avec capacité de charge de 180 kgs.

- Bloc multiprises de grande qualité avec boîtier métallique pour chaque niveau de charge. 10 prises de courant sont montées sur la paroi arrière de l'armoire.

- Casiers métalliques avec bloc multiprises.

Une seule couleur disponible pour les portes : bleu gentiane

Dimensions extérieures des armoires (LxlxH) mm :

- Modèles IO90.195.120.CS.WDC : 1193 x 615 x 1953mm

- Modèle IO90.195.060.CS.WDC et IO90.195.060.CC.WDC : 599 x 615 x 1953mm

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire : 75 mm

Référence	Modèle	Version	Repère	Prix € HT
A005666	IO90.195.060.CS.WDC	CS=CORE STORE	A	3591,62
A005667	IO90.195.120.CS.WDC	CS=CORE STORE	B	4667,89
A005668	IO90.195.060.CC.WDC	CC=CORE CHARGE	C	3791,69

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-CORE-90 CHARGE L=600mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005499	4 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=1L)	708,55
K005500	7 casiers métalliques avec étagère perforée, bloc prise et bac de rétention (V=1L)	1842,13

✓ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-CORE-90 STORE L=600mm**

Référence	Désignation	Prix €HT
K005491	3 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=1L)	302,80
K005492	4 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=1L)	385,98
K005493	5 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=1L)	469,16
K005494	6 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=1L)	552,34

✓ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-CORE-90 STORE L=1200mm**

Référence	Désignation	Prix €HT
K005495	3 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=2.6L)	567,55
K005496	4 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=2.6L)	729,85
K005497	5 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=2.6L)	892,16
K005498	6 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=2.6L)	1054,46

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS ION-CHARGE-UB-90 POUR LE CHARGEMENT DES BATTERIES LITHIUM



- > Stockage passif ou actif des batteries au Lithium
- > Résistance au feu NF EN 14470-1 et NF EN 1363-1
- > Conformité CE

L'armoire sous paillasse ION-CHARGE permet un stockage passif ou actif des batteries au Lithium.

Passif : pour l'entreposage des batteries uniquement.

Actif : sur les 2 tiroirs des prises de chargement sont présentes et permettent de brancher les batteries et les charger en sécurité.

L'armoire est certifiée 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur selon la norme NF EN 14470-1.

L'armoire est certifiée 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur selon la norme NF EN 1363-1.

Chargement sûr des batteries à l'intérieur de l'armoire de sécurité résistante au feu grâce à des prises de contact de protection de haute qualité, prêtes à l'emploi.

En cas d'avarie, le socle de transport intégré et les roulettes permettent une évacuation immédiate vers un lieu sécurisé à l'extérieur du bâtiment.

Grâce à une hauteur de 78 cm, l'armoire de sécurité peut être intégrée de manière flexible et facilement sous un plan de travail, établie, escalier...

Détecteur de fumée et capteur de température pour la détection des incendies et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.

Tiroir verrouillable pour protéger contre l'accès non autorisé et le vol.

Avec l'armoire, il faut prévoir l'aménagement intérieur et le socle à roulettes pour permettre de le déplacer aisément.

Modèle IO90.078.059.057.U9.S

Dimensions extérieures LxPxH mm = 592x570x780 mm

Référence	Désignation	Prix €HT
A005665	Armoire IO90.078.059.057.U9.S	2643,71
K005490	Kit 2 tiroirs coulissants avec bloc prises pour charge batteries	612,69
O005265	Socle à roulettes de transport	220,12

Le saviez-vous?

Commandez facilement et rapidement sur :

www.grosseron.com

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



Grosseron
being a part of you

ARMOIRE ASECOS ION-PRO-90



asecos®



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14 470-1 et DIN EN 1363-1
- > Certification VDMA 24994
- > Stockage sécurisé passif et actif

Cette armoire est utilisée pour le stockage et la recharge des batteries Lithium.

Nouvelle génération d'armoire ION-Line d'ASECOS.

Elle est composée d'une armoire avec des blocs prises résistants au feu pour le chargement et stockage des batteries (PRO CHARGE) et d'une armoire uniquement de stockage (PRO STORE).

Robuste et durable : corps extérieur stable, de grande qualité et anti-rayure avec surface de structure à revêtement par poudre, fixation de porte triple, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de l'espace de stockage.

Ergonomique : Nouveau système d'ouverture et de fermeture de portes. Une seule poignée pour ouvrir les 2 portes. Ouverture réalisable avec une seule main. Fermeture sécurisée et renforcée en deux points en haut et en bas permettant une meilleure étanchéité en cas d'explosion de batterie lithium dans l'armoire en évitant l'entrée d'oxygène à l'intérieur de l'armoire.

Fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile.

Utilisation contrôlée : portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture). L'indicateur de fonction LED en haut de l'armoire possède une alarme visuelle et sonore permet une reconnaissance d'une urgence sans ouvrir les portes de l'armoire.

Transport facile : socle de transport intégré pour le transport interne, plinthe disponible en option.

Installation aisée : pieds réglables intégrés pour la compensation des irrégularités du sol.

Ventilation et aération de l'air ambiant : Dispositif de ventilation en haut de l'armoire pour éviter l'accumulation de chaleur pendant la charge de la batterie.

L'aspiration se fait du bas vers le haut par ce ventilateur pour suivre la circulation de l'air et de la chaleur qui monte dans l'armoire.

Un clapet d'air sur le dessus de l'armoire permet par décompression de diminuer en cas d'incendie la pression dans l'armoire.

Pour un gain de volume utile dans l'armoire, le bac de rétention a été réduit.

Stockage sécurisé actif et recharge sûre : système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux qui se déclenche automatiquement en cas d'incendie dans l'armoire.

Détecteur de fumée, capteur de température intégrés pour la détection des incendies et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.

L'armoire est équipée en usine d'une alarme contact sec que nous recommandons de connecter au réseau électrique du bâtiment (en option, possibilité d'avoir un relais ou un module de signalisation à distance de transmission des alarmes).

Modifications électroniques de sécurité sur cette nouvelle version:

- Quand la température est supérieure à 50°C pour l'armoire de chargement, toutes les prises de recharges s'éteignent. quand on passe sous les 50°C, les prises s'enclenchent de nouveau. La ventilation continue de tourner.

- En cas de fumée (température supérieure à 70°C), la ventilations s'éteint, le clapet de ventilation se ferme, les prises s'éteignent et le système d'extinction s'enclenche.

Protection totale : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur (DIN EN 1363-1).

Équipements intérieur disponibles suivant les modèles:

- Étagères grillagées pour charge lourde réglables en hauteur avec capacité de charge de 180 kgs.

- Bloc multiprises de grande qualité avec boîtier métallique pour chaque niveau de charge. 10 prises de courant sont montées sur la paroi arrière de l'armoire.

Pour garantir un stockage sûr des batteries lithium-ion, L'armoire suit également la certification VDMA 24994. Cette certification rigoureuse garantit que le feu, la fumée et les explosions restent confinés, minimisant ainsi les dégâts et assurant la sécurité des entreprises et utilisateurs.

Une seule couleur disponible pour les portes : bleu gentiane

Dimensions extérieures:

-(L x l x H) :1193 x 615 x 2224 mm pour modèle IO90.195.120.PC.WDC (PROC CHARGE) et IO90.195.120.PS.WDC (PRO STORE)

Armoire de 1200mm de long : alimentation électrique 230V (environ 10 batteries de 400W en stockage). Pour optimiser le stockage prévoir un branchement en triphasé.

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire : 75 mm

Référence	Modèle	Version	Repère	Prix €HT
A005669	IO90.195.120.PS.WDC	PS=PRO STORE	A	5811,34
A005670	IO90.195.120.PC.WDC	BPC=PRO CORE	B	6659,37

✓ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-PRO-90 CORE L=1200mm**

Référence	Désignation	Prix €HT
K005501	3 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=2.6L)	1101,12
K005502	4 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=2.6L)	1385,15
K005503	5 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=2.6L)	1669,18
K005504	6 étagères perforées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention (V=2.6L)	1953,21

✓ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-PRO-90 STORE L=1200mm**

Référence	Désignation	Prix €HT
K005495	3 étagères perforées et 1 bac de rétention (V=2.6L)	567,55
K005496	4 étagères perforées et 1 bac de rétention (V=2.6L)	729,85
K005497	5 étagères perforées et 1 bac de rétention (V=2.6L)	892,16
K005498	6 étagères perforées et 1 bac de rétention (V=2.6L)	1054,46

STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES NF EN 14470-1

ARMOIRE ASECOS FX-CLASSIC-90 AVEC FILTRATION INTÉGRÉE



asecos[®]



- > Construction extrêmement robuste
- > Système de filtration à usage multiple
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

Armoire combinée entièrement résistante au feu robuste et durable avec une structure extérieure résistante aux rayures et revêtue epoxy. Elle possède un système de fermeture et des éléments de sécurité protégés contre la corrosion.

Deux compartiments (division verticale) permettent le stockage de substances dangereuses inflammables et agressives dans une même armoire.

Les portes se maintiennent à l'angle d'ouverture voulu et possèdent un système de fermeture automatique en cas d'incendie.

Portes verrouillables avec serrure.

L'état de fermeture des portes est indiqué par un voyant vert ou rouge.

Socle de transport et pieds réglables intégrés.

Présence d'un caisson de filtration silencieux intégré (39db) avec un filtre multicouches. Ce caisson possède une surveillance électronique avec alarme sonore et visuelle sur un panneau de commande par écran tactile.

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 min

Homologuée GS, conforme CE

Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris et Rouge

Dimensions uniques de l'armoire : 1193 x 615 x 2294 mm

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Référence	Couleur	Prix €HT
A005530		6446,32
A005531		6446,32
A005532		6446,32

✓ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires FX-Classic-90**

Référence	Désignation	Aménagement compartiment Gauche	Aménagement compartiment de droite	Prix €HT
K005439	Kit étagères classiques	3 étagères + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol	3 étagères de rétention 1 bac e rétention au sol	815,80

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires FX-Classic-90 (Suite)

Référence	Désignation	Aménagement compartiment Gauche	Aménagement compartiment de droite	Prix €HT
K005440	Kit étagères classique et coulissantes	6 tiroirs	3 étagères de rétention 1 bac e rétention au sol	1495,58

✔ Filtre à charbon actif de rechange pour FX-Classic

> Filtre multicouche

Robuste et puissant avec 5 niveaux de filtration (AS/BE/F/K/HP).
Ecologique grâce à sa longueur de vie et à la possibilité de le retraiter.

Référence	Prix €HT
F005201	532,58

ARMOIRE ASECOS FX-DISPLAY-30 AVEC FILTRATION INTÉGRÉE



asecos



- > Construction extrêmement robuste
- > Système de filtration à usage multiple
- > Résistance au feu 30 min selon NF EN 14470-1

Armoire robuste et durable avec une structure extérieure résistante aux rayures et revêtue epoxy. Elle possède un système de fermeture et des éléments de sécurité protégés contre la corrosion.

Large surface vitrée pour un aperçu rapide et simple des récipients sans ouvrir la porte.

Les portes se maintiennent à l'angle d'ouverture voulu et possèdent un système de fermeture automatique en cas d'incendie.

Portes verrouillables avec serrure.

L'état de fermeture des portes est indiqué par un voyant vert ou rouge.

Socle de transport et pieds réglables intégrés.

Présence d'un caisson de filtration silencieux intégré (39db) avec un filtre multicouches. Ce caisson possède une surveillance électronique avec alarme sonore et visuelle sur un panneau de commande par écran tactile.

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 30 min

Homologuée GS, conforme CE

Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris et Rouge

Dimensions uniques de l'armoire : 864 x 620 x 2294 mm

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Référence	Couleur	Prix €HT
A005542		6294,18
A005543		6294,18
A005544		6294,18

✔ Filtre à charbon actif de rechange pour FX-Display

> Filtre multicouche

Robuste et puissant avec 5 niveaux de filtration (AS/BE/F/K/HP).
Ecologique grâce à sa longueur de vie et à la possibilité de le retraiter.

Référence	Prix €HT
F005201	532,58

ARMOIRE ASECOS FX-PEGASUS-90 AVEC FILTRATION INTÉGRÉE



asecos®



- > Construction extrêmement robuste
- > Système de filtration à usage multiple
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1
- > Système de fermeture automatique des portes TSA

Armoire robuste et durable avec une structure extérieure résistante aux rayures et revêtue epoxy. Elle possède un système de fermeture et des éléments de sécurité protégés contre la corrosion.

Ouverture des deux portes avec une seule main (AGT).

Les portes sont maintenues ouvertes et l'armoire possède un système automatique de fermeture de séries (TSA) en libérant les portes au bout de 60 secondes. Cette fermeture est précédée d'une alarme sonore et visuelle.

Portes verrouillables avec serrure.

L'état de fermeture des portes est indiqué par un voyant vert ou rouge.

Socle de transport et pieds réglables intégrés.

Présence d'un caisson de filtration silencieux intégré (39db) avec un filtre multicouches. Ce caisson possède une surveillance électronique avec alarme sonore et visuelle sur un panneau de commande par écran tactile.

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 min

Homologuée GS, conforme CE

Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris, Rouge

Dimensions des armoires :

- 1193 x 615 x 2294 mm pour modèle FX90.229.120.WDAC

- 893 x 615 x 2294 mm pour modèle FX90.229.090.WDAC

- 599 x 615 x 2294 mm pour modèle FX90.229.060.WDAC

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Couleur	■	■	■
Modèle FX90.229.120.WDAC - Largeur 1200 mm	A005533	A005534	A005535
Prix €HT	6519,07	6519,07	6519,07
Modèle FX90.229.090.WDAC - Largeur 900 mm	A005536	A005537	A005538
Prix €HT	6252,03	6252,03	6252,03
Modèle FX90.229.060.WDAC - Largeur 600 mm	A005539	A005540	A005541
Prix €HT	5896,79	5896,79	5896,79

✔ Filtre à charbon actif de rechange pour FX-Pegasus

- > Filtre multicouche

Robuste et puissant avec 5 niveaux de filtration (AS/BE/F/K/HP).

Écologique grâce à sa longueur de vie et à la possibilité de le retraiter.

Référence	Largeur des Armoires	Prix €HT
F005201	1200/900 mm	532,58
F005202	600 mm	491,02

ESPACE CLIENT EN LIGNE

L'espace client personnalisé...

www.grosseron.com

Espace client

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Identifiant:

Mot de passe:

[Ouvrir mon espace client](#)

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe. Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements. Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

ARMOIRE ASECOS K-PHOENIX COMBINÉE : SOLVANT-ACIDE-BASE



asecos®



- > 1 compartiment pour produits inflammables résistant au feu 90 ou 30 min
- > 2 compartiments résistants aux produits hautement corrosifs

Plus qu'une armoire de rangement l'armoire combinée offre de véritables garanties de sécurité et de longévité. Une seule sortie d'extraction, prévoir un caisson de filtration avec un filtre BE.

Partie produits inflammables:

Armoire conforme à la norme française NF EN 14 470-1 et certifiée par un laboratoire indépendant agréé. Aménagement intérieur : étagères réglables ou tiroirs extractibles avec rétention intégrée. Ouverture aisée de la porte.

Partie acides/bases (SL) :

2 compartiments hermétiques séparés avec aspiration indépendante. Résistance à la corrosion élevée. Étagères extractibles avec bacs de rétention 15L PE (étagères fixes pour modèle 30 min).

Marque ASECOS
Fermeture automatique des portes par déclenchement thermique en cas d'incendie
Modèle FWAC avec système TSA : Temporisation magnétique de fermeture automatique des portes
Couleur : gris (RAL 7035)
Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Référence	Modèle	Dim. ext. L x P x H mm	Poids kg	Résistance au feu	Prix € HT
A005512	K30.197.120.MV.FWAS	1200x600x1970	330	30min	2820,55
A005298	K90.196.120.MF.FWAS	1200x615x1968	515	90min	3394,93
A005299	K90.196.120.MF.FWAC	1200x615x1968	515	90min	3470,90

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires K-Line 30 min

Référence	Compartiment gauche anti-feu	Compartiment droit Acide-base	Prix € HT
K005423	3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=27L)	4 étagères avec bac plastique (V=15L)	531,12
K005424	3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=27L)	6 étagères avec bac plastique (V=15L)	699,64

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires K-Line 90 min

Référence	Compartiment gauche anti-feu	Compartiment droit Acide-base	Prix € HT
K005292	3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	4 étagères coulissantes avec bacs	608,84
K005293	6 tiroirs à extension totale	6 étagères coulissantes avec bacs	1497,08



MAINTENANCE & MÉTROLOGIE



Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.

Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties

02 40 92 07 09

sav@grosseron.com

ARMOIRE ASECOS Q-CLASSIC 30



asecos®



- > Certifiée GS avec 50 000 fermetures sans usure
- > Socle de transport intégré
- > 7 couleurs de portes disponibles

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 30 minutes.

Structure en panneaux spéciaux résistants au feu et recouverts de résine de mélamine gris anthracite RAL 7016. Portes avec tôles en acier et revêtement de structure par poudre disponibles dans 7 couleurs sans supplément. Les éléments de sécurité sont protégés contre la corrosion et montés en dehors de l'espace de rangement, surfaces résistantes aux rayures et aux chocs, faciles à nettoyer. Facile à manipuler avec des portes de confort qui restent en position dans tous les angles d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie. Pas d'utilisation non autorisée - portes verrouillables avec un cylindre profilé (compatible avec les serrures à combinaisons multiples). Transport facile – socle de transport intégré.

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Hauteur réglable des étagères (32 mm)

Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent, Blanc

Dimensions externes des armoires:

- 1160x615x1955 mm pour modèle Q30.195.116

- 860x615x1955 mm pour modèle Q30.195.086

- 560x615x1955 mm pour modèle Q30.195.056

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle.

Couleur	■	■	■	■	■	■	■
Modèle Q30.195.116 - largeur 1160 mm	A005207	A005208	A005209	A005210	A005211	A005212	A005213
Prix €HT	2162,08	2162,08	2162,08	2162,08	2162,08	2162,08	2162,08
Modèle Q30.195.086 - largeur 860mm	A005513	A005514	A005515	A005516	A005517	A005518	A005519
Prix €HT	1833,86	1833,86	1833,86	1833,86	1833,86	1833,86	1833,86
Modèle Q30.195.056 - largeur 560 mm	A005214	A005215	A005216	A005217	A005218	A005219	A005220
Prix €HT	1699,13	1699,13	1699,13	1699,13	1699,13	1699,13	1699,13

ARMOIRE ASECOS Q-CLASSIC 90



asecos®



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14 470-1

ARMOIRE ASECOS Q-CLASSIC 90 (SUITE)

Construction :

Rigidité maximale en torsion.

Peinture structurée résistante aux rayures.

Serrure anti effraction avec témoin de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermé/ouvert) et canon interchangeable ; intégration possible dans une installation de fermeture centralisée.

Portes :

Les portes de l'armoire peuvent rester bloquées dans toutes les positions entre 0° et 90° pour faciliter la manipulation des produits dangereux dans l'armoire de sécurité.

En cas d'incendie, la sécurité est garantie par la fermeture automatique des portes déclenchée par les thermo-fusibles intégrés.

Socle et Q-Mover :

Socle de transport et de manutention intégré.

Déplacement facilité de l'armoire sans palette.

Plinthe frontale amovible pour cacher le passage de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de l'armoire.

Système Q-Mover (option) permettant aux armoires de sécurité de la série Q de passer verticalement les portes d'une hauteur standard.

Testées et homologuées avec une résistance au feu de 90 minutes

Homologuées GS, conformes CE

Couleurs disponibles de portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent et Blanc

Dimensions des armoires :

- 1200x615x1955 mm pour modèle Q90.195.120

- 900x615x1955 mm pour modèle Q90.195.090

- 600x615x1955 mm pour modèle Q90.195.060

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Couleur							
Modèle Q90.195.120 - largeur 1200 mm	A005200	A005201	A005202	A005203	A005204	A005205	A005206
Prix €HT	3225,75	3225,75	3225,75	3225,75	3225,75	3225,75	3225,75
Modèle Q90.195.090 - largeur 900 mm	A005228	A005229	A005230	A005231	A005232	A005233	A005234
Prix €HT	3122,43	3122,43	3122,43	3122,43	3122,43	3122,43	3122,43
Modèle Q90.195.060 - largeur 600 mm	A005242	A005243	A005244	A005245	A005246	A005247	A005248
Prix €HT	2533,86	2533,86	2533,86	2533,86	2533,86	2533,86	2533,86

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=600mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005219	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	191,90
K005220	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	226,48
K005221	Kit 3 étagères - 1 bac (V=22L)	157,32
K005222	Kit 4 étagères - 1 bac (V=22L)	191,90
K005223	Kit 3 étagères - bac (V=12L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	376,99
K005226	Kit 4 tiroirs	581,12
K005227	Kit 5 tiroirs	726,39
K005228	Kit 6 tiroirs	871,68

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=900mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005210	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L)	224,56
K005211	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L)	268,40
K005212	Kit 3 étagères - 1 bac (V=23L)	180,72
K005213	Kit 4 étagères - 1 bac (V=23L)	224,56
K005216	Kit 4 tiroirs	925,17
K005217	Kit 5 tiroirs	1156,47
K005218	Kit 6 tiroirs	1387,76

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=1200mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005200	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L) L=1200 mm	224,56
K005201	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L) L=1200 mm	268,40
K005202	Kit 3 étagères - 1 bac (V=33L) L=1200 mm	180,72
K005203	Kit 4 étagères - 1 bac (V=33L)	224,56
K005204	Kit 3 étagères - 1 bac (V=33L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=55L)	410,59
K005207	Kit 4 tiroirs	925,17
K005208	Kit 5 tiroirs	1156,47

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=1200mm (Suite)

Référence	Désignation	Prix €HT
K005209	Kit 6 tiroirs	1387,76

Accessoires optionnels pour armoire Q-Line

Référence	Désignation	Prix €HT
O005202	Q-Mover	205,13
O005200	Passage de gaine	105,02
O005201	Plinthe de sol L=1200 mm	31,17
O005203	Caoutchouc anti-dérapant pour tiroir L=1200 mm	15,10
O005205	Plinthe de sol L=900 mm	26,21
O005206	Caoutchouc anti-dérapant pour tiroirs L=900 mm	15,10
O005207	Plinthe de sol L=600 mm	24,29
O005208	Caoutchouc anti-dérapant pour tiroir L=600 mm	14,14

ARMOIRE ASECOS Q-CLASSIC 90 À PLUSIEURS COMPARTIMENTS



asecos®

- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1
- > Plusieurs compartiments

Construction :

Rigidité maximale en torsion. Peinture structurée résistante aux rayures. Serrure anti-effraction avec témoin de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermée/ouverte) et canon interchangeable ; intégration possible dans une installation de fermeture centralisée.

Portes :

Les portes de l'armoire peuvent rester bloquées dans toutes les positions entre 0° et 90° pour faciliter la manipulation des produits dangereux dans l'armoire de sécurité. En cas d'incendie, la sécurité est garantie par la fermeture automatique des portes déclenchée par les thermo-fusibles intégrés.

Socle et Q-Mover :

Socle de transport et de manutention intégré. Déplacement facilité de l'armoire sans palette. Plinthe frontale amovible pour cacher le passage de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de l'armoire. Le système Q-Mover (en option) permet aux armoires de sécurité de la série Q de passer verticalement les portes d'une hauteur standard.

Compartmentation :

Deux modèles d'armoire à compartiments antifeu 90min :

- Une armoire à 2 compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire.
- Une armoire tout en un avec plusieurs compartiments (au nombre de 4) qui permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire.

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 minutes pour tous les compartiments

Homologuée GS, conforme CE

Couleurs disponibles de portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent et Blanc

Les 2 armoires existent en 120 cm de large avec les dimensions suivantes :

1195 x 615 x 1955 mm

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire de 75 mm

Couleur porte	■	■	■	■	■	■	■
Armoire Q-Classic-90 à 2 compartiments	A005556	A005557	A005558	A005559	A005560	A005561	A005562
Prix €HT	3387,84	3387,84	3387,84	3387,84	3387,84	3387,84	3387,84
Armoire Q-classic-90 à 4 compartiments	A005563	A005564	A005565	A005566	A005567	A005568	A005569
Prix €HT	3450,63	3450,63	3450,63	3450,63	3450,63	3450,63	3450,63

✔ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Classic-90 à 2 compartiments L=1200mm**

Référence	Compartiment Gauche	Compartiment Droite	Prix €HT
K005439	Kit 3 étagères + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	Kit 3 étagères de rétention + 1 bac de rétention au sol (V=11L)	815,80
K005440	Kit 6 tiroirs	Kit 3 étagères de rétention + 1 bac de rétention au sol (V=11L)	1495,58

✔ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Classic-90 à plusieurs compartiments L=1200mm**

Référence	Désignation	Prix €HT
K005441	Kit 2 étagères + 2 caillebotis + 2 bac de rétention au sol (V=22L) + 4 tiroirs	826,60
K005442	Kit 4 étagères + 4 bacs de rétention au sol (V=22L)	352,64
K005443	Kit 4 étagères + 4 caillebotis + 4 bacs de rétention au sol (V=22L)	490,97

ARMOIRE ASECOS Q-DISPLAY-30



- > Certifiée GS avec 50 000 ouvertures et fermetures sans usure
- > Porte vitrée
- > Socle de transport intégré
- > 3 couleurs de portes disponibles

Armoire testée et homologuée avec une résistance au feu de 30 minutes.
 Structure extérieure solide en plaques spéciales ignifugées revêtues d'une résine de mélanine.
 Large surface vitrée pour un aperçu rapide et simple des récipients sans ouvrir la porte.
 Manipulation facile et confortable avec une porte qui se bloque à l'angle d'ouverture voulu et une fermeture automatique en cas d'incendie.
 Porte verrouillable avec cylindre profilé.
 Transport facilité avec un socle de transport intégré.

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire de 75 mm
 Couleurs disponibles des portes vitrées : Jaune, Gris, Rouge
 Dimensions externes des armoires : 864 x 620 x 1947 mm pour le modèle Q30.195.086.WDFW
 Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Référence	Couleur	Prix €HT
A005525		2635,17
A005526		2635,17
A005527		2635,17

Le saviez-vous?

Commandez facilement et rapidement sur :

www.grosseron.com

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



Grosseron
being a part of you

ARMOIRE ASECOS Q-PEGASUS 90



asecos®



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

Construction :

- Rigidité maximale en torsion.
- Peinture structurée résistante aux rayures.
- Serrure anti-effraction de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermé/ouvert) et canon interchangeable.

Portes :

- Manipulation facile avec une ouverture des deux portes avec une seule main (AGT).
- Possibilité de bloquer l'ouverture des portes pour chargement et déchargement sécurisé des contenants.
- Fermeture automatique des portes (TSA) de série permettant de relâcher les portes au bout de 60 secondes d'ouverture. Un signal d'alarme visuel et sonore se met en marche avant la fermeture des portes.

Socle et Q-Mover :

- socle de transport et de manutention intégré.
- Déplacement aisé de l'armoire sans palette.
- Plinthe frontale amovible (option) pour cacher le passage de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de l'armoire.
- Système Q-Mover (en option) permet aux armoires de sécurité de la série Q de passer verticalement les portes d'une hauteur standard.

Testées et homologuées avec une résistance au feu de 90 min

Homologuées GS, conformes CE

Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent, Blanc

Dimensions des armoires :

- 1200x615x1955 mm pour modèle Q90.195.120.WDAC

- 900x615x1955 mm pour modèle Q90.195.090.WDAC

- 600x615x1955 mm pour modèle Q90.195.060.WDAC

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Couleur	■	■	■	■	■	■	■
Modèle Q90.195.120.WDAC - largeur 1200 mm	A005221	A005222	A005223	A005224	A005225	A005226	A005227
Prix €HT	3499,25	3499,25	3499,25	3499,25	3499,25	3499,25	3499,25
Modèle Q90.195.090.WDAC - largeur 900 mm	A005235	A005236	A005237	A005238	A005239	A005240	A005241
Prix €HT	3399,00	3399,00	3399,00	3399,00	3399,00	3399,00	3399,00
Modèle Q90.195.060.WDAC - largeur 600 mm	A005249	A005250	A005251	A005252	A005253	A005254	A005255
Prix €HT	2741,52	2741,52	2741,52	2741,52	2741,52	2741,52	2741,52

ARMOIRE ASECOS Q-PHOENIX 90



asecos®



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

ARMOIRE ASECOS Q-PHOENIX 90 (SUITE)

Armoire durable et robuste, protection contre la corrosion. Certifiée GS avec 50 000 cycles d'ouvertures et de fermetures sans usure.
 Ventilation : conduit d'air intégrée DN75 à un système d'extraction. L'hélice de ventilation indique le bon fonctionnement du système d'échappement à l'intérieur de l'armoire.
 Portes pliables pour une économie d'espace. Porte réglable avec arrêt dans toutes les positions. Fermeture automatique des portes en cas d'incendie.
 Equipement intérieur multiple et identique au reste de la gamme Q-Line. Dispositifs de réglage pour un alignement et une compensation rapides et efficaces sur des planchers inégaux (maximum 10 mm).
 Verrouillage de l'armoire avec serrure. Étiquetage de sécurité.

Couleur disponible des portes : Jaune - Dimensions externes des armoires : 1193 x 615 x 1955 mm pour modèle Q90.195.120.FD - Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire : 75 mm
 Il n'existe qu'un seul modèle d'armoire
 Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement

Référence	Couleur	Prix €HT
A005523	■	3775,71

ARMOIRE ASECOS S-CLASSIC 90 À PORTES BATTANTES



asecos®



- > Conforme NF EN 14470-1 et certifiée
- > Armoire haute qualité

Pourquoi stocker dans une armoire résistante au feu 90 min ?

Pour protéger les personnes sur le lieu de travail.
 Pour donner le temps suffisant aux services de sécurité d'intervenir.
 Pour rationaliser votre stockage en toute sécurité.

Les avantages :

Fermeture en douceur des portes grâce à des vérins pneumatiques.
 Mécanisme de fermeture des portes placé hors de la cellule de stockage : protection accrue contre la corrosion.
 Étagères réglables, bac de rétention amovible au sol.

Options : pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211.
 Installation de l'armoire sur le lieu d'utilisation hors raccordement.

Thermo-fusible permettant la fermeture automatique en cas d'élévation de la température, maintien des portes sur les armoires de modèle WDAS

Marque ASECOS

Couleurs disponibles : Gris (RAL 7035), Jaune (RAL 1004)

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Modèles avec WDAS : armoires avec maintien de porte par un thermofusible. Cela permet une fermeture automatique en cas d'élévation de la température

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Référence	Modèle	Dim. ext. L x P x H mm	Dim. int. L x P x H mm	Poids kg env.	Couleur	Repère	Prix €HT
A005264	S90.196.120	1200x615x1968	1050x520x1740	420	■	A	2661,50
A005272	S90.196.090	900x615x1968	750x520x1740	310	■	B	2598,70
A005280	S90.196.060	600x615x1968	450x520x1740	260	■	C	2101,31
A005261	S90.129.120	1200x615x1298	1050x520x1070	270	■	D	2484,33
A005293	S90.129.060	600x615x1268	450x520x1070	170	■	E	1861,13
A005265	S90.196.120.WDAS	1200x615x1968	1050x520x1740	420	■	A	2825,62
A005273	S90.196.090.WDAS	900x615x1968	750x520x1740	310	■	B	2762,81
A005281	S90.196.060.WDAS	600x615x1968	450x520x1740	260	■	C	2185,39
A005262	S90.129.120.WDAS	1200x615x1298	1050x520x1070	270	■	D	2628,41
A005294	S90.129.060.WDAS	600x615x1268	450x520x1070	170	■	E	1908,94

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=600 mm-H=1290 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 600x615x1298 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005276	Kit 2 étagères - 1 caillebotis - 1 bac	157,32
K005277	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac	191,90
K005278	Kit 2 étagères - 1 bac	122,74
K005279	kit 3 étagères - 1 bac	157,32
K005280	Kit 2 étagères - bac (V=12L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	335,10
K005283	Kit 2 tiroirs pour armoire avec maintien de porte WDAS	290,56
K005284	Kit 3 tiroirs pour armoire avec maintien de porte WDAS	435,84

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=600 mm-H=1960 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 600x615x1968 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005264	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	191,90
K005265	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	226,48
K005266	Kit 3 étagères - 1 bac (V=22L)	157,32
K005267	Kit 4 étagères - 1 bac (V=22L)	191,90
K005268	Kit 3 étagères - bac (V=12L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	376,99
K005271	Kit 4 tiroirs	581,12
K005272	Kit 5 tiroirs	726,39
K005273	kit 6 tiroirs	871,68

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=900 mm-H=1960 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 900x615x1968 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005255	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L)	224,56
K005256	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L)	268,40
K005257	Kit 3 étagères - 1 bac (V=23L)	180,72
K005258	Kit 4 étagères - 1 bac (V=23L)	224,56
K005261	kit 4 tiroirs	925,17
K005262	Kit 5 tiroirs	1156,47
K005263	Kit 6 tiroirs	1387,76

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=1200 mm-H=1290 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 1200x615x1298 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005242	Kit 2 étagères - 1 caillebotis - 1 bac	180,72
K005243	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac	224,56
K005244	Kit 2 étagères - 1 bac (V=33L)	136,88
K005245	kit 3 étagères - 1 bac (V=33L)	180,72
K005246	Kit 2 étagères - bac (V=55L) - 1 caillebotis - 1 bac	361,39
K005249	Kit 2 tiroirs	462,59
K005250	Kit 3 tiroirs	693,88

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=1200 mm-H=1960 mm

Pour les armoires de dimensions externes LxPxH : 1200x615x1968 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005231	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	224,56
K005232	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	268,40
K005234	kit 3 étagères - 1 bac (V=33L)	180,72
K005235	kit 4 étagères - 1 bac (V=33L)	224,56
K005236	kit 3 étagères/bac (V=33L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=55L)	410,59
K005239	Kit 4 tiroirs	925,17

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=1200 mm-H=1960 mm (Suite)

Référence	Désignation	Prix € HT
K005240	kit 5 tiroirs	1156,47
K005241	kit 6 tiroirs	1387,76

ARMOIRE ASECOS S-CLASSIC-30 ASECOS



asecos®

> Conforme NF EN 14470-1 et certifiée

Armoire résistante au feu 30 minutes avec socle pour une fixation murale.
Idéale pour une utilisation en atelier ou dans le milieu industriel.
Robuste et durable avec des tôles en acier solide revêtues époxy.
Montage réalisable par soi-même.
Deux portes battantes à fermeture automatique.
Serrure en option, à prévoir obligatoirement à la commande.

Livrée avec un bac de rétention au sol et une console de fixation murale
Possibilité de rajouter une étagère de rétention supplémentaire sur demande
Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire de 75 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
A005528	Armoire S-Classic-30+serrure	1244,97
A005529	Armoire S-Classic-30	1244,97

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS K-UB 90 COMBINÉE



asecos®

- > S'adapte parfaitement sous votre paillasse
- > 1 compartiment pour produits inflammables résistant au feu 90 min
- > 1 compartiment résistant aux produits hautement corrosifs

Partie produits inflammables :

- Armoire conforme à la norme français NF EN 14470-1 et certifiée par un laboratoire indépendant agréé.
- Ouverture simple des tiroirs ou portes sans effort.
- Angle d'ouverture de la porte à 135° permettant un accès facile et sécurisé à l'intérieur de l'armoire.
- Arrêt des portes et tiroirs dans toutes les positions.
- Tiroir de série avec câble de terre avec borne et bac soudé de façon étanche.
- Portes et tiroirs verrouillables avec une serrure à barillet.

Partie Acides/Bases :

- Panneaux résistants avec un revêtement mélaminé.
- Porte verrouillable avec serrure à barillet.
- Étagères coulissantes stables avec bac de rétention.

Marque ASECOS
Fermeture automatique des tiroirs ou des portes par déclenchement thermique en cas d'incendie
Socle à roulettes en option
Couleur : Gris (RAL 7035)
Diamètre externe de raccordement à la sortie arrière de l'armoire est de 50 mm (prévoir le réducteur O005248).

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS K-UB 90 COMBINÉE (SUITE)

Modèle	K90.060.110.050.UB.ST	K90.060.140.050.UB.ST	K90.060.110.050.UB.2T	K90.060.140.050.UB.3T
Largeur	Largeur 1100 mm	Largeur 1400 mm	Largeur 1100 mm	Largeur 1400 mm
Dim. ext. L x P x H mm	1100X500X600	1400X500X600	1100X500X600	1400X500X600
Poids kg	155	197	155	197
90 min - 1 tiroir gauche - 1 porte droite	A005306	A005308		
Prix €HT	1947,71	2281,83		
90 min - 2 portes battantes			A005307	
Prix €HT			1980,83	
90 min - 3 portes battantes				A005309
Prix €HT				2433,78

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires K-Line sous-paillasse combinées

Compartiment gauche anti-feu	1 tiroir-1 bac	1 tiroir-1 bac	1 caillebotis-1 bac	1 caillebotis-1 bac
Compartiment droit Acide/Base	1 étagère coulissante avec bac	2 étagères coulissantes avec bacs	1 étagère coulissante avec bac	2 étagères coulissantes avec bacs
Kit pour modèle K90.060.110.050.UB.ST	K005302	K005303		
Prix €HT	212,82	341,39		
Kit pour modèle K90.060.140.050.UB.ST	K005306	K005307		
Prix €HT	231,83	360,39		
Kit pour modèle K90.060.110.050.UB.2T			K005304	K005305
Prix €HT			206,98	335,55
Kit pour modèle K90.060.140.050.UB.3T			K005308	
Prix €HT			242,05	

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS 90 MIN ET 30 MIN NF EN 14 470-1



- > S'adapte parfaitement sous votre paillasse
- > A tiroirs ou portes battantes : vos récipients accessibles en toute sécurité
- > Monté sur socle à roulettes pour faciliter le déplacement

Les avantages : ouverture des tiroirs sans effort. Arrêt du tiroir dans toutes les positions. Préhension des récipients avec les deux mains.

Fermeture SOFT CLOSE, peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit.

Sécurité garantie : résistante au feu 90 min pour une sécurité maximale. Conforme à la norme NF EN 14470-1 et certifié par un organisme indépendant agréé.

Options : étagères extractibles : idéal pour optimiser l'espace de rangement de vos petits produits.

Bacs de rétention amovibles, tapis antiglis, rack (stockage petits récipients). Pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211.

Les armoires à portes battantes, il est obligatoire de prévoir un aménagement intérieur.

Les armoires avec tiroir sont livrées en standard avec un tiroir de rétention. Pour une autre configuration intérieure pour les armoires à tiroirs, merci de nous contacter.

Marque ASECOS

Fermeture automatique des tiroirs ou des portes par déclenchement thermique en cas d'incendie

Socle à roulettes en option

Couleur : Gris (RAL 7035)

Diamètre externe de raccordement à la sortie arrière de l'armoire est de 50 mm (prévoir le réducteur)

Largeur	Largeur 600mm	Largeur 600mm	Largeur 900mm	Largeur 1100mm	Largeur 1100mm	Largeur 1100mm	Largeur 1400mm
Dim. ext. L x P x H mm	592x570x600	593x600x800	890x570x600	1100x500x600	1100x574x600	1102x600x800	1400x550X600
Poids kg	120	143	140	160	180	233	200
90 min - 1 tiroir	A005332	A005553	A005328	A005316	A005315		
Prix €HT	1480,80	1666,21	1826,93	2016,88	1899,99		
90 min - 2 tiroirs					A005318	A005552	A005310
Prix €HT					2390,91	2912,07	2504,87

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS 90 MIN ET 30 MIN NF EN 14 470-1 (SUITE)

Largeur	Largeur 600mm	Largeur 600mm	Largeur 900mm	Largeur 1100mm	Largeur 1100mm	Largeur 1100mm	Largeur 1400mm
Dim. ext. L x P x H mm	592x570x600	593x600x800	890x570x600	1100x500x600	1100x574x600	1102x600x800	1400x550x600
Poids kg	120	143	140	160	180	233	200
90 min - 1 porte battante	A005334						
Prix €HT	1426,31						
90 min - 2 portes battantes	A005330			A005323			
Prix €HT	1981,82			2061,69			
30 min - 1 tiroir	A005317						
Prix €HT	1584,40						

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 60cm à portes battantes

Référence	Désignation	Prix €HT
B005238	Bac de rétention 7270	43,84
C005227	Caillebotis + bac de rétention 30485	78,42
E005218	Etagère + caillebotis + bac de rétention 30486	115,92

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 90cm à portes battantes

Référence	Désignation	Prix €HT
B005216	Bac de rétention 12681	69,64
K005321	Caillebotis + bac de rétention 30466	113,48
K005322	Etagère + caillebotis + bac de rétention 30467	162,68

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 110cm à portes battantes

Référence	Désignation	Prix €HT
B005212	Bac de rétention 8372	66,23
K005315	Caillebotis + bac de rétention	109,09
K005316	Etagère + caillebotis + bac de rétention	151,94

✓ Socle à roulettes pour armoire sous-paillasse ASECOS

> Stabilité et flexibilité

Socle avec roulettes permettant un positionnement et un déplacement plus aisé de l'armoire sous une paillasse impliquant une stabilité. Mécanisme de verrouillage intégré pour plus de sécurité. Réglage de la hauteur pour les divers mobiliers de laboratoire.

Différents socles suivant la longueur de l'armoire sous-paillasse
Hauteur du socle de 30 mm

Socle à prévoir au moment de la commande car le montage se fait en usine

Référence	Longueur en mm	Prix €HT
O005226	1400	107,15
O005216	1100	83,78
O005220	900	83,78
O005249	600	83,78



SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Gamme complète d'équipements pour la rétention et le stockage des matières dangereuses.

Armoire de sécurité - Bac de rétention - Récipient de sécurité







ARMOIRE ASECOS S-PEGASUS 90 À SYSTÈME D'OUVERTURE UNIQUE



- > Portes à fermeture automatique
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

Avantages :

- système d'ouverture unique : armoire à portes battantes, ouverture des 2 portes d'une seul geste avec un effort à peine perceptible.
- temporisation de la fermeture automatique après 60 secondes (option TSA) : plus d'émanation de vapeurs toxiques.
- résistante au feu 90 min pour une sécurité maximale.
- conforme à la norme NF EN 14470-1 et certifié par un organisme indépendant agréé.

Options :

Pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211. Installation de l'armoire sur le lieu d'utilisation hors raccordement.

Possibilité d'aménagement selon vos besoins. Pour plus d'informations, nous contacter.

Poids : 420 kg

Couleur : gris (RAL 7035), disponible en jaune (RAL 1004)

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Référence	Modèle	Dim. ext. LxPxH mm	Dim. int. LxPxH mm	Couleur	Prix € HT
A005271	S90.129.120.WDAC	1200x615x1298	1050x520x1070	■	3047,46
A005287	S90.129.060.WDAC	600x615x1298	450x520x1070	■	2197,55

ARMOIRE ASECOS PHOENIX 90 À PORTES PLIABLES



asecos[®]

- > La nouvelle génération d'armoires à portes pliables qui allie sécurité et ergonomie
- > Un gain de place pour un stockage maximum
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

Encombrement minimal des portes ouvertes.

Tiroirs entièrement extractibles : grande capacité de stockage (gain jusqu'à 50%) et confort d'accès à tous les récipients.

Sécurité garantie : résistante au feu 90 min pour une sécurité maximale.

Conforme à la norme NF EN 14470-1 et certifié par un organisme indépendant agréé.

Modèle FDAS avec maintien de porte avec thermofusible pour une fermeture automatique en cas d'augmentation de la température.

Les avantages option Vol.2 :

Ouverture des 2 portes d'une seule main avec un effort à peine perceptible.

Fermeture automatique sans courant après 60 secondes : plus d'émanation de vapeurs toxiques.

ARMOIRE ASECOS PHOENIX 90 À PORTES PLIABLES (SUITE)

Marque ASECOS

Armoire à portes pliables

Couleur : gris (RAL 7035), disponible en jaune (RAL 1004)

Mise en place "à l'endroit d'utilisation" conseillée

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Référence	Modèle	Dim. ext. LxPxH mm	Dim. int. LxPxH mm	Poids	Couleur	Prix € HT
A005267	S90.196.120.FDAS	1200x615x1968	1050x520x1740	420	■	3292,47
A005275	S90.196.090.FDAS	900x615x1968	750x520x1740	360	■	3037,19
A005283	S90.196.060.FDAS	600x615x1968	450x520x1740	260	■	2547,63
A005268	S90.196.120.FDAC Vol.2	1200x615x1298	1050x520x1740	420	■	3367,06
A005284	S90.196.060.FDAC Vol.2	600x615x1298	450x520x1740	260	■	2602,25
A005296	S90.196.060.075.FDAS	600x750x1968	450x655x1740	310	■	2595,95
A005297	S90.196.060.075.FDAC Vol.2	600x750x1968	450x655x1740	310	■	2650,58

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Phoenix L=600 mmHP=1968 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 600x750x1968 mm

Profondeur de l'armoire : 750 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005285	Kit 4 tiroirs remplissage	721,57
K005286	Kit 5 tiroirs remplissage	901,96
K005287	Kit 6 tiroirs remplissage	1082,36
O005210	Caoutchouc anti-dérapant pour tiroir P=750 mm	15,10

ARMOIRE ASECOS V-MOVE 90



asecos®

- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1
- > Porte à ouverture électronique
- > Tiroirs verticaux
- > Volume de stockage optimisé

Construction :

Rigidité maximale en torsion. Peinture structurée résistante aux rayures. Serrure anti-effraction avec témoin de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermé/ouvert) et canon interchangeable ; intégration possible dans une installation de fermeture centralisée.

Portes :

Les tiroirs sont à ouverture et fermeture motorisées par simple pression sur un bouton. Fermeture automatique des tiroirs au bout d'une minute ou en cas de panne de courant (batteries de secours) avec un signal visuel et sonore. Un système anti-pincement sécurise la fermeture des tiroirs. Le tiroir vertical donne une vue d'ensemble et un accès simple aux produits stockés.

Pour le modèle 81 cm de large, pas d'ouverture simultanée des tiroirs. Les deux tiroirs s'ouvrent alternativement. En cas d'incendie, la sécurité est garantie par la fermeture automatique des tiroirs déclenchée par les thermo-fusibles intégrés (température > 69°C).

ARMOIRE ASECOS V-MOVE 90 (SUITE)

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 minutes

Homologuée GS, conforme CE

Dimensions des armoires :

- 450 x 863 x 1966 mm pour le modèle de largeur 45 cm

- 819 x 863 x 1966 mm pour le modèle de largeur 81 cm

2 versions de couleur :

- Unicolore pour l'ensemble de l'armoire : gris clair ou en blanc

- Bicolore avec le corps de l'armoire gris anthracite et différentes couleurs disponibles pour les portes : jaune, gris clair, rouge, bleu, acier

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Les aménagements sont optimisés pour ranger des bouteilles de 2.5 L et/ou 1 L

En option, possibilité de rajouter un système de glissières de sécurité (1 glissière par étagère)

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Version	Unicolore	Unicolore	Bicolore	Bicolore	Bicolore	Bicolore	Bicolore
Couleur des portes							
Armoire V-move-90 Largeur = 45 cm	A005570	A005571	A005572	A005573	A005574	A005575	A005576
Prix €HT	4127,34						
Armoire V-move-90 Largeur = 81 cm	A005577	A005578	A005579	A005580	A005581	A005582	A005583
Prix €HT	6199,93						

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires V-Move 90 - largeur 45cm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005444	Kit 4 étagères pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	246,31
K005445	Kit 5 étagères pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	282,69

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires V-Move 90 - largeur 81cm

Référence	Compartiment Gauche	Compartiment Droite	Prix €HT
K005446	Kit 4 étagères pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	Kit 4 étagères pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	492,63
K005447	Kit 5 étagères pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	Kit 5 étagères pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	565,38
K005448	Kit 4 étagères pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	Kit 5 étagères pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	529,01

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS 90MN POUR COLLECTE DES DÉCHETS



asecos



> Résistance au feu 90 mn selon EN 14 470-1

Sécurité garantie : résistante au feu 90 mn pour une sécurité maximale. Conforme à la norme NF EN 14470-1 et certifié par un organisme indépendant agréé.

Câble de mise à la terre de série

Dimensions intérieures utiles : 469 x 452 x 502 mm

Diamètre externe de raccordement à la sortie arrière de l'armoire est de 50 mm (prévoir le réducteur O005261)

Pas de socle à roulette pour cette armoire

Option obligatoire : 1 tiroir bac de 33L (O005221) + Passage de câble et tuyaux (O005200). LIVRE SANS JERRICAN NI TUYAU.

Référence	Désignation	Dim. ext. L x P x H mm	Poids kg	Prix €HT
A005334	Armoire sous-paillasse 90min collecte déchets, prévoir le bac	590 x 500 x 600	125	1426,31
O005221	Bac tiroir 33L	469 x 452 x 502	5	606,71
O005200	Passage de gaine, câble et tuyau résistant au feu	/	/	105,02
O005261	Réducteur 75 à 50mm en PP	/	/	11,19

STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES

ARMOIRE ATELIER ASECOS E-CLASSIC 30



asecos®

- > Box de sécurité intégré résistant au feu 30 min
- > Conforme à la norme NF EN 14 470-1

Combinaison idéale pour le stockage séparé d'outils et de matériel d'atelier dans une armoire en acier ainsi que des produits dangereux et inflammables en petites quantités tels que des peintures, des solvants, des vernis, des aérosols, des lubrifiants,... dans le box de sécurité.

Avantages : portes battantes avec serrure de sécurité. Aménagement intérieur flexible.

Options : pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211.

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire 75mm

Référence	Modèle	Désignation	Dim. ext. L x P x H mm	Poids kg env.	Etagères	Prix € HT
A005671	E.195.095.F	Armoire atelier avec box intégré 30 min	950x500x1950	120	2 étagères et 1 bac de rétention au sol	1577,66
A005673	EM.195.095.F	Armoire atelier avec box intégré 30 min	950x500x1950	120	4 étagères simples	1680,31

STOCKAGE DES PRODUITS COURANTS ET TOXIQUES

ARMOIRE DE SÛRETÉ ASECOS CS CLASSIC



- > Construction solide et durable
- > Verrouillage de l'armoire
- > Réduction des odeurs

ARMOIRE DE SÛRETÉ ASECOS CS CLASSIC (SUITE)



Deux hauteurs : 1105 et 1950 mm. Trois largeurs : 545, 810 et 1055 mm. Une profondeur : 520 mm.
 Portes battantes ou portes battantes vitrées.
 Construction robuste en acier, revêtement époxy. Étagères en acier galvanisé réglables en hauteur par pas de 25 mm.
 Autocollant avec pictogrammes normalisés.
 Serrure de sécurité 2 points.
 Système de démontage rapide des portes.
 Pieds réglables intégrés pour la mise à niveau de l'armoire.
 Aération naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire.
 Possibilité de raccordement sur le toit de l'armoire à un système de ventilation Ø 75mm.

Disponible sur demande :

- Equipement tiroirs
- Portes pliables
- Couleurs blanche et argent

Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé, charge : 100 kg
 Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classique à choisir obligatoirement suivant le modèle
 Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Couleur										
Type de porte	Pleine	Pleine	Pleine	Pleine	Pleine	Vitrée	Vitrée	Vitrée	Vitrée	Vitrée
Modèle CS.110.054 H=1105mm-L=545mm	A005408	A005409	A005410	A005411	A005412	A005422	A005423	A005424	A005425	A005426
Prix €HT	609,37	609,37	609,37	609,37	609,37	677,54	677,54	677,54	677,54	677,54
Modèle CS.110.081 H=1105mm-L=810mm	A005380	A005381	A005382	A005383	A005384	A005387	A005388	A005389	A005390	A005391
Prix €HT	663,91	663,91	663,91	663,91	663,91	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33
Modèle CS.110.105 H=1105mm-L=1055mm	A005338	A005339	A005340	A005341	A005342	A005345	A005346	A005347	A005348	A005349
Prix €HT	685,34	685,34	685,34	685,34	685,34	830,48	830,48	830,48	830,48	830,48
Modèle CS.195.054 H=1950mm-L=545mm	A005436	A005437	A005438	A005439	A005440	A005443	A005444	A005445	A005446	A005447
Prix €HT	672,67	672,67	672,67	672,67	672,67	782,75	782,75	782,75	782,75	782,75
Modèle CS.195.081 H=1950mm-L=810mm	A005394	A005395	A005396	A005397	A005398	A005401	A005402	A005403	A005404	A005405
Prix €HT	773,98	773,98	773,98	773,98	773,98	985,13	985,13	985,13	985,13	985,13
Modèle CS.195.105 H=1950mm-L=1055mm	A005359	A005360	A005361	A005362	A005363	A005366	A005367	A005368	A005369	A005370
Prix €HT	795,41	795,41	795,41	795,41	795,41	1013,55	1013,55	1013,55	1013,55	1013,55

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classique L=545mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005363	2 étagères-1 caillebotis-1 bac H=1105mm	177,71
K005364	2 étagères-1 bac H=1105mm	146,19
K005369	2 étagères coulissantes H=1105mm	217,50
K005370	3 étagères coulissantes H=1105mm	326,25
K005371	3 étagères-1 caillebotis-1 bac H=1950mm	203,78
K005372	3 étagères-1 bac H=1950mm	172,25
K005377	4 étagères coulissantes H=1950mm	434,99
K005378	5 étagères coulissantes H=1950mm	543,74
K005379	6 étagères coulissantes H=1950mm	652,49

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classique L=810mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005346	2 étagères-1 caillebotis-1 bac H=1105mm	199,34
K005347	2 étagères-1 bac H=1105mm	154,67
K005352	2 étagères coulissantes H=1105mm	254,35
K005353	3 étagères coulissantes H=1105mm	381,53
K005354	3 étagères-1 caillebotis-1 bac H=1950mm	225,03
K005355	3 étagères-1 bac H=1950mm	180,35
K005360	4 étagères coulissantes H=1950mm	508,70
K005361	5 étagères coulissantes H=1950mm	635,88
K005362	6 étagères coulissantes H=1950mm	763,05

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classique L=1055mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005325	2 étagères-1 caillebotis-1 bac H=1105mm	201,82
K005326	2 étagères-1 bac H=1105mm	156,02
K005333	2 étagères coulissantes H=1105mm	296,88
K005334	3 étagères coulissantes H=1105mm	445,32
K005335	3 étagères-1 caillebotis-1 bac H=1950mm	228,24
K005336	3 étagères-1 bac H=1950mm	182,44
K005343	4 étagères coulissantes H=1950mm	593,76
K005344	5 étagères coulissantes H=1950mm	742,19
K005345	6 étagères coulissantes H=1950mm	890,64

ARMOIRE DE SÛRETÉ ASECOS CX-CLASSIC-G AVEC FILTRATION INTÉGRÉE



- > Construction solide et durable
- > Verrouillage de l'armoire
- > Réduction des odeurs
- > Aspiration et filtration à usage multiple

Armoire robuste et durable avec une structure extérieure solide de grande qualité et résistante aux rayures. La surface est structurée et revêtue epoxy. Les portes sont vitrées et verrouillables avec serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative.

L'installation est simple avec des pieds réglables intégrés pour la compensation d'irrégularités du sol.

Présence d'un caisson de filtration intégré silencieux (39db) avec un filtre multicouche. Ce caisson possède une surveillance électronique avec alarme sonore et visuelle sur un panneau de commande par écran tactile.

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classique à choisir obligatoirement suivant le modèle

Dimensions des armoires :

- 1055 x 520 x 2290 mm pour le modèle CX.229.105.WDFW

- 810 x 520 x 2290 mm pour le modèle CX.229.081.WDFW

Portes vitrées - Couleurs disponibles pour les portes : gris et blanc

Couleur	■	□
Modèle CX.229.105.WDFW - largeur 1055 mm	A005545	A005546
Prix €HT	4290,79	4290,79
Modèle CX.229.081.WDFW - largeur 810 mm	A005547	A005548
Prix €HT	4248,00	4248,00

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CX-Classic L=810mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005354	3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac de rétention	225,03
K005355	3 étagères - 1 bac de rétention	180,35
K005360	4 étagères coulissantes	508,70
K005361	5 étagères coulissantes	635,88
K005362	6 étagères coulissantes	763,05

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CX-Classic L=1055mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005335	3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac de rétention	228,24

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CX-Classic L=1055mm (Suite)

Référence	Désignation	Prix €HT
K005336	3 étagères - 1 bac de rétention	182,44
K005343	4 étagères coulissantes	593,76
K005344	5 étagères coulissantes	742,19
K005345	6 étagères coulissantes	890,64

✔ Filtre à charbon actif de rechange pour CX-Classic

> Filtre multicouche

Robuste et puissant avec 5 niveaux de filtration (AS/BE/F/K/HP).
Ecologique grâce à sa longueur de vie et à la possibilité de le retraiter

Référence	Largeur des armoires	Prix €HT
F005203	1055 mm	605,30
F005204	810 mm	524,49

ARMOIRE À COMPARTIMENTS ASECOS CS-CLASSIC MULTIRISK



asecos®



- > Construction solide et durable
- > Etiquetage des compartiments
- > Verrouillage de chaque compartiment

Une seule hauteur de 1950 mm. Deux largeurs : 545 mm pour l'armoire de 3 compartiments et 1050 mm pour l'armoire de 4 compartiments. Profondeur de 520 mm.

Portes battantes de couleur blanche.

Un stockage sûr, approuvé et séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire.

Construction solide et durable entièrement soudée, appropriée pour les sollicitations industrielles élevées. Surface peinte résistante aux rayures et construction de porte à double paroi.

Chaque compartiment s'ouvre individuellement et est protégé par une serrure.

Réglage facile pour compenser le plancher et la mise en place.

Aération naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire

Différents équipements intérieurs possibles, étagères classiques ou coulissantes.

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire : la flexibilité du stockage de différents produits

Etiquetage des compartiments par vos soins : les pictogrammes normalisés (autocollants) sont fournis.

Armoire grise et portes blanches.

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classic Multirisk à choisir obligatoirement suivant le modèle.

Capacité de charge de l'étagère classique est de 50 kg, capacité de charge de l'étagère coulissante est de 30 kg.

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Référence	Nombre de compartiment	Dimension ext. LxPxH mm	Poids kg	Prix €HT
A005521	4	1055x520x1950	68	1486,01
A005522	3	545X520X1950	46	1136,32

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classic et CX-Classic Multirisk 4 compartiments

Référence	Désignation	Aménagement 2 compartiments supérieurs	Aménagement 2 compartiments inférieurs	Prix €HT
K005425	Kit étagères classiques	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	593,91
K005426	Kit étagères classiques et coulissantes	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	2 étagères coulissantes avec bac	831,56
K005428	Kit étagères coulissantes	2 étagères coulissantes avec bac	2 étagères coulissantes avec bac	1069,22

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classic Multirisk 3 compartiments

Référence	Désignation	Aménagement supérieur	Aménagement central et inférieur	Prix €HT
K005429	Kit étagères classiques	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	454,95
K005430	Kit étagères classiques et coulissantes	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	2 étagères coulissantes avec bac	586,64
K005431	Kit étagères coulissantes	2 étagères coulissantes avec bac	2 étagères coulissantes avec bac	652,49

ARMOIRE À COMPARTIMENTS ASECOS CX-CLASSIC-MULTIRISK AVEC FILTRATION INTÉGRÉE



asecos®



- > Construction solide et durable
- > Verrouillage de chaque compartiment
- > Réduction des odeurs
- > Aspiration et filtration à usage multiple
- > Etiquetage des compartiments

Armoire robuste et durable avec une structure extérieure solide de grande qualité et résistante aux rayures. La surface est structurée et revêtue epoxy. 4 compartiments (division multiple) permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire.

Chaque compartiment possède un marquage simple grâce à des pictogrammes et sont verrouillables individuellement avec une serrure à cylindre intégrée dans les poignées rotatives.

L'installation est simple avec des pieds réglables intégrés pour la compensation d'irrégularités du sol.

Présence d'un caisson de filtration intégré silencieux (39db) avec un filtre multicouche. Ce caisson possède une surveillance électronique avec alarme sonore et visuelle sur un panneau de commande par écran tactile.

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire : la flexibilité du stockage de différents produits

Etiquetage des compartiments par vos soins : les pictogrammes normalisés (autocollants) sont fournis.

Armoire grise et portes blanches

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CX-Classic Multirisk à choisir obligatoirement

Dimensions de l'armoire : 1055 x 520 x 2290 mm

Référence	Nombre de compartiments	Dimension ext. LxPxH mm	Poids kg	Prix €HT
A005549	4	1055x520x2290 mm	98	4529,62

✔ Filtre à charbon actif de rechange pour CX-Multirisk

- > Filtre multicouche

Robuste et puissant avec 5 niveaux de filtration (AS/BE/F/K/HP).

Ecologique grâce à sa longueur de vie et à la possibilité de le retraiter.

Référence	Désignation	Largeur Armoire	Prix €HT
F005203	Filtre à charbon actif de rechange	1200mm	605,30
F005204	Filtre à charbon actif de rechange	600mm	524,49

MAINTENANCE & MÉTROLOGIE

Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.

02 40 92 07 09

sav@grosseron.com

Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties

STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GAZ

ARMOIRE EXTÉRIURE ASECOS G-OD POUR BOUTEILLES DE GAZ



asecos®

> Pour le stockage sécurisé à l'extérieur

Résistance élevée contre la corrosion.

Socle double épaisseur Inox pour une meilleure protection mécanique.

Serrure de sécurité 2 points.

Rampe de montage pour les armatures et les chaînes de maintien des bouteilles.

10 ou 5 possibilités de passage de conduits à travers le toit de l'armoire selon modèle (orifices obturés avec des bouchons en plastique).

Possibilités de portes pleines, avec une vitre fixe ou vitres ouvertes

Livrée avec l'équipement intérieur

Référence	Modèle	Dim. ext. L x P x H mm	Nb de bouteilles	Type de porte	Prix €HT
A005509	GOD.215.070.R	740x470x2150	2x50 L	Pleine	1717,12
A005506	GOD.215.100	1040x470x2150	3x50 L	Pleine	1993,06
A005503	GOD.215.135	139x470x2150	4x50 L	Pleine	2130,03
A005510	GOD.215.070.WDFWR	740x470x2150	2x50 L	Vitre fixe	1891,35
A005507	GOD.215.100.WDFW	1040x470x2150	3x50 L	Vitre fixe	2279,10
A005504	GOD.215.135.WDFW	139x470x2150	4x50 L	Vitre fixe	2434,20
A005511	GOD.215.070.WDHWR	740x470x2150	2x50 L	Vitre ouverte	2036,37
A005508	GOD.215.100.WDHW	1040x470x2150	3x50 L	Vitre ouverte	2667,85
A005505	GOD.215.135.WDHW	139x470x2150	4x50 L	Vitre ouverte	2837,04

ARMOIRE ASECOS B10 NF EN 14470-2 POUR BOUTEILLES DE GAZ



asecos®

> Pour le stockage de 2 bouteilles de 10 L

> Conforme à la norme NF EN 14470-2

Résistance au feu certifié selon EN 14470-2 de 90 minutes.

Armoire équipée d'une rampe d'accès manipulable avec une seule main.

Hauteur utilisable de 1255 mm.

Une aération optimale de l'armoire est garantie grâce aux canaux d'aération.

Un toit avec les emplacements de tuyaux pré-poinçonné autorise un soutirage des gaz sans ouverture des portes.

Les bouteilles peuvent être fixées avec les sangles intégrées.

Rampe de série sur toutes les armoires G90 ou G30.

ARMOIRE ASECOS B10 NF EN 14470-2 POUR BOUTEILLES DE GAZ (SUITE)

Armoire à portes battantes, livrée sans équipement intérieur; kit intérieur à rajouter
Couleur : Gris, disponible en jaune (nous consulter)

Référence	Nb de bouteille	Dim. ext. L x P x H mm	Dim. int. L x P x H mm	Prix € HT
A005499	2X10 L	600X615X1450 mm	445X425X1255 mm	3139,55

Kit pour l'équipement intérieur des armoires à gaz G-Line Ultimate 90

> Maintien des bouteilles

Le kit d'équipement intérieur existe en 2 gammes : standard et confort. Le kit standard est composé de profils de montage, rampe, maintien de bouteilles et sangles. Le kit confort est composé de profils de montage, rampe (L=350mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteilles et sangles.

Référence	Compatibilité Armoire	Gamme	Prix € HT
K005421	A005499	Standard	265,92
K005414	A005491	Standard	265,92
K005415	A005491	Confort	427,94
K005416	A005493	Standard	294,16
K005408	A005487	Standard	294,16
K005409	A005487	Confort	462,78
K005402	A005483	Standard	370,15
K005403	A005483	Confort	502,04
K005396	A005479	Standard	375,99
K005397	A005479	Confort	515,02
K005419	A005495	Standard	184,11
K005412	A005489	Standard	228,91
K005406	A005485	Standard	255,20

ARMOIRE ASECOS G-ULTIMATE NF EN 14470-2 POUR BOUTEILLES DE GAZ



- > Pour le stockage en toute sécurité de vos bouteilles de gaz dans un bâtiment
- > Conforme à la nouvelle norme NF EN 14470-2
- > 4 modèles pour 1 à 4 bouteilles
- > Existe en 90 min et 30 min

Les avantages :

Protection optimale contre l'incendie : l'écart de température ne dépasse pas 50 K sur la bouteille au cours de 90 min / 30 min du test selon la norme NF EN 14470-2

Conformes aux normes NF EN 14470-2, TRG 280, BRG 120 et TRG 526.

Manutention sûre et facile grâce à la large rampe d'accès escamotable.

Montage facile des appareils de contrôle (hauteur intérieure élevée).

Raccords des bouteilles de gaz prévus à travers le toit de l'armoire.

Rampe de série sur toutes les armoires G90 ou G30.

Sécurité garantie :

Résistante au feu 90mn / 30mn selon la norme NF EN 14470-2.

Certifié par un organisme indépendant agréé.

Options :

Pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation.

Installation de l'armoire sur le lieu d'utilisation hors raccordement.

Marque ASECOS

Armoire à portes battantes, livrée sans équipement intérieur; kit intérieur à rajouter

Modèle d'armoire de 60cm de long avec une porte, la charnière est à gauche. Pour une charnière à droite, merci de nous consulter.

Couleur : Gris, disponible en jaune (nous consulter)

ARMOIRE ASECOS G-ULTIMATE NF EN 14470-2 POUR BOUTEILLES DE GAZ (SUITE)

Nb de bouteille	1X50 L	2X50 L	3X50 L	3X50 L + 1X10 L	4X50 L
Dim. ext. L x P x H mm	600X615X2050 mm	600X615X2050 mm	900X615X2050 mm	1200X615X2050 mm	1500X615X2050 mm
Armoire 90 min modèle G90.205	A005491	A005493	A005487	A005483	A005479
Prix €HT	3139,55	3659,53	3717,29	4088,70	4536,47
Armoire 30 min modèle G90.205		A005495	A005489	A005485	
Prix €HT		2373,61	2790,52	2923,37	

STOCKAGE DES PRODUITS CORROSIFS

ARMOIRE HAUTE RÉSISTANCE ASECOS SL-LINE POUR ACIDES ET BASES



asecos®



- > Armoire haute qualité
- > Résiste aux produits hautement corrosifs

Permet le stockage dans des compartiments séparés.

Les avantages :

Etagères coulissantes et bacs de rétention en polyéthylène amovibles pour une manipulation sûre et facile même avec les produits placés au fond.
2 compartiments hermétiques, séparés l'un de l'autre et fermés à clé.
Revêtement haute résistance même dans une atmosphère agressive.

A noter :

Les 2 compartiments ont une utilisation et une ventilation individuelle.

Options :

Pour une meilleure longévité, il est conseillé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211.

Mise en place "à l'endroit d'utilisation" conseillée.

2 types d'armoires hautes de largeur 1200mm et 600mm.
2 types d'armoires sous-paillasse de hauteur 600mm et 800mm

Revêtement intérieur : panneaux mélaminés protégés par une peinture époxy résistante aux attaques chimiques et mécaniques ; extérieur en tôle d'acier revêtement époxy pour les armoires hautes et en mélaminé avec revêtement époxy pour les armoires sous-paillasse

Volume de rétention d'un bac : 15 litres

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires acide-base SL à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm et pour les armoires sous paillasse est de 50 mm (prévoir le réducteur).

Socle à roulette en option pour les armoires sous-paillasse

Référence	Modèle	Désignation	Largeur	Dim. ext. L x P x H mm	Poids kg	Prix €HT
A005467	SL.196.120.MV	Armoire haute	L=1200mm	1200x600x1970mm	215	2338,35
A005468	SL.196.060.MH	Armoire haute	L=600mm	600x600x1970mm	135	1765,99
A005470	SL.060.110.UB.2T	Armoire sous-paillasse 2 portes	L=1100mm	1100x570x600mm	55	848,02
A005471	SL.060.059.UB.T	Armoire sous-paillasse 1 porte	L=600mm	600x570x600mm	40	637,13
A005469	SL.060.140.UB.3T	Armoire sous-paillasse 3 portes	L=1400mm	1400x570x600mm	80	1080,81
A005554	SL.080.110.UB.2T	Armoire sous-paillasse 2 portes et hauteur 800mm	L=1100mm	1100x570x800mm	73	918,43
A005555	SL.080.059.UB.TR	Armoire sous-paillasse 1 porte avec butée et hauteur 800mm	L=600mm	590x570x800mm	48	698,96

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires acide-base SL/SLX L=600mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005388	4 étagères coulissantes (2+2)	416,94
K005389	6 étagères coulissantes (3+3)	625,41

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des amoires acide-base SL/SLX L=1200mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005385	8 étagères coulissantes	833,88
K005386	12 étagères coulissantes	1250,82

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des amoires acide-base sous-paillasse SL L=600mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005394	1 étagère coulissante	104,24
K005395	2 étagères coulissantes	208,47

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des amoires acide-base sous-paillasse SL L=1100mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005392	2 étagères coulissantes (1+1)	208,47
K005393	4 étagères coulissantes (2+2)	416,94

✔ Kit pour l'aménagement intérieur des amoires acide-base sous-paillasse SL L=1400mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005390	2 étagères coulissantes avec bac de rétention au sol (1+1)+ 1 étagère fixe	208,47
K005391	4 étagères coulissantes avec bac de rétention au sol (2+2)+ 1 étagère fixe	416,94

ARMOIRE HAUTE RÉSISTANCE AVEC FILTRATION INTÉGRÉE ASECOS SLX-CLASSIC POUR ACIDES ET BASES



asecos®



- > Armoire haute qualité
- > Résiste aux produits hautement corrosifs
- > Filtration intégrée à usage multiple

Stockage sécurisé et conforme d'acides et de bases dans les salles de travail.

L'armoire est robuste et durable composée de deux compartiments pour le stockage séparé d'acides et de bases. Elle possède également un mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion.

Les portes sont verrouillables avec serrure à cylindre.

Elle s'installe facilement avec des pieds réglables intégrés pour la compensation des irrégularités du sol.

L'avantage de cette armoire est la présence d'un caisson de filtration intégré. Le filtre est un filtre multicouche robuste, puissant et écologique avec une durée de vie longue et la possibilité de le retirer.

Ce caisson possède un écran de contrôle et de commande simple d'utilisation et tactile permettant de suivre les paramètres de surveillance essentiels.

Structure extérieure de l'armoire en tôle d'acier revêtu epoxy

Kit pour l'aménagement intérieur des amoires acide-base SLX à choisir obligatoirement suivant le modèle

Référence	Modèle	Largeur	Dim. ext. LxPxH mm	Prix € HT
A005550	SLX.230.120.MV	L=1200 mm	1197x615x2300mm	5511,78
A005551	SLX.230.060.MV	L=600 mm	600x615x2300mm	4952,87

✔ Filtre à charbon actif de rechange pour SLX-Classic Asecos

> Filtre multicouche

Robuste et puissant avec 5 niveaux de filtration (AS/BE/F/K/HP).
Écologique grâce à sa longueur de vie et à la possibilité de le retraiter.

Référence	Désignation	Largeur Armoire	Prix € HT
F005203	Filtre à charbon actif de rechange	1200mm	605,30
F005204	Filtre à charbon actif de rechange	600mm	524,49

VENTILATION

CAISSON DE VENTILATION ET CAISSON DE FILTRATION ASECOS CONFORME À LA NORME NF X 15-211



Caisson de ventilation :

Ventilateur centrifuge pour armoire de stockage de produits inflammables et corrosifs avec volute et turbine en polypropylène anticorrosion.

Traitement antistatique.

Prévoir une évacuation vers l'extérieur à moins de 10 m.

Diamètre externe de sortie du caisson de ventilation est de 75 mm.

Le caisson de ventilation est livré sans gaine ni collier de serrage. Les prévoir en plus du caisson.

Non compatible pour les armoires sous-paillasse d'ASECOS.

Caisson de filtration :

Conforme à la norme NF X 15-211. Pas de raccordement vers l'extérieur.

Air filtré et purifié : garantie d'un rejet < 1% de la VME dans le laboratoire.

Type filtres AS (vapeurs organiques) ou BE (vapeurs organiques et acides).

Filtres de fabrication ERLAB.

Pour les caissons de filtration, sélectionner les filtres de type F2 (F2AS ou F2BE).

Diamètre externe de sortie du caisson de filtration est de 75 mm.

Pour les armoires sous-paillasse d'ASECOS, prévoir en plus le réducteur de 75 à 50 mm en PP.

Les caissons de filtration sont livrés en standard avec 1m de gaine et 2 colliers de serrage.

Sur demande, possibilité de filtre HEPA, de filtre pour le Formaldéhyde et de filtre pour l'ammoniaque.

Niveau sonore:

- CVR/10 = 52,5db

- CVF = 49db

Câble alimentation 2,5m

Diamètre de la collerette est de 80mm

Les caissons de filtration (10008266 ou O005259) sont livrés en standard avec 1m de gaine et 2 colliers de serrage.

Le caisson de ventilation (O005247) est livré sans gaine ni collier de serrage. Les prévoir en plus du caisson.

Attention, pour des armoires hautes de 60cm de large, les caissons de filtration dépasseront du dessus de l'armoire.

Les filtres AS et BE de remplacement sont les filtres de type F2

Référence	Désignation	Dim H x l x P (mm)	Prix € HT
O005247	Caisson de ventilation HF.EA.8677 (livré sans collier ni gaine)	200 x 400 x 200	646,55
C005231	Collier de serrage chrome vendu à l'unité	/	9,37
G005200	Gaine aspiration PVC vendu au mètre	/	29,55
10008266	Caisson de filtration + filtre AS - EP.L.53048 (livré avec 1m de gaine et 2 colliers)	305 x 395 x 425	1248,48
O005259	Caisson de filtration + filtre BE - EP.L.53049 (livré avec 1m de gaine et 2 colliers)	305 x 395 x 425	1420,15
O005261	Réducteur 75 à 50 mm en PP pour armoire sous paillasse ASECOS	/	11,19

Le saviez-vous?

Commandez facilement et rapidement sur :

www.grosseron.com

- ✔ Frais de port **RÉDUITS**
- ✔ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✔ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✔ Paiement **SÉCURISÉ**


Grosseron
being a part of you

CAISSON DE VENTILATION ET DE FILTRATION ATEX ASECOS POUR ARMOIRE HAUTE



- > Conforme à la norme ATEX : CE EX II 3 G T4
- > Silencieux 39 db (A)

Caisson de ventilation :

Boîtier de ventilation silencieux et prêt à raccorder. Pour armoires hautes.

Renouvellement de 120 fois le volume d'air de l'armoire.

Prévoir une évacuation vers l'extérieure à moins de 10 m.

Diamètre interne de connexion du caisson de ventilation est de 75 mm.

Le caisson d'extraction se connecte et s'emboîte directement sur la sortie de ventilation de l'armoire. A prévoir si nécessaire ensuite la gaine et colliers vers la bouche d'extraction de sortie vers l'extérieure.

Caisson de filtration pour solvant :

Le filtre à charbon actif est en mesure de retenir des vapeurs de solvants de manière permanente dans plus de 99,999 % des cas, jusqu'à saturation du filtre.

Testé dans des conditions d'exploitation normales et lors d'un incident simulé dans une armoire de sécurité.

Alarme sonore et visuelle avec contact sec.

Surveillance automatique du taux de saturation du filtre.

Diamètre interne de connexion du caisson de filtration est de 75 mm.

Le caisson de filtration se connecte et s'emboîte directement sur la sortie de ventilation de l'armoire.

Référence	Modèle	Désignation	Dim. ext. L x P x H mm	Repère	Prix € HT
O005247	HF.EA.8677	Caisson de ventilation sans contrôle d'évacuation d'air	200x400x200mm	A	646,55
10012189	HF.EA.11442	Caisson de ventilation avec contrôle d'évacuation d'air	200x400x200mm	/	855,97
C005231	/	Collier de serrage chrome vendu à l'unité	/	/	9,37
G005200	/	Gaine aspiration PVC vendu au mètre	/	/	29,55
O005262	UFA.025.30	Caisson de filtration pour armoire haute	305X555X300mm	B	1581,12

CAISSON DE VENTILATION ET DE FILTRATION ASECOS SOUS-PAILLASSE



Boîtier de ventilation silencieux et prêt à raccorder.

Renouvellement de 10 fois le volume d'air de l'armoire par heure.

Pour la filtration, il est constitué du caisson ATEX ASECOS accompagné d'un support sur le côté de l'armoire permettant de relier caisson et armoire sans gaine.

Avec le caisson de filtration sous paillasse, merci de prévoir l'adaptateur latéral (M005200) ou la console de montage mural (M005201).

Le caisson de ventilation est livré avec les équerres de fixation murales et 1m de gaine.

Boîtier en acier

Filtre AS, câbles de raccordement et prises secteur inclus

Alarme visuelle et sonore du débit d'air et de saturation du filtre.

Référence	Modèle	Désignation	Dim. ext. L x P x H mm	Prix € HT
O005256	HF.EA.11570	Caisson de ventilation ATEX montage mural sans contrôle de débit d'air	200x400x200mm	740,06
O005254	HF.EA.23866	Caisson de ventilation ATEX montage mural pour armoire sous-paillasse avec contrôle de débit d'air	400x200x340mm	1107,54
O005246	HF.EA.8473	Caisson de ventilation ATEX montage mural pour armoire sous-paillasse avec contrôle de débit d'air et contact sec pour alarme extérieure	400x200x340mm	1233,55
O005262	UFA.025.30	Caisson de filtration ATEX pour armoire sous-paillasse	305X555X300mm	1581,12
M005200	26885	Adaptateur latéral acier sous paillasse pour caisson UFA.20.30-AUS	/	646,49
M005201	23458	Console de montage mural pour caisson UFA.20.30-AUS	/	196,92

Grosseron
being a part of you



grosseron.com

info@grosseron.com
+33 (0)2 40 92 07 09

ZAC Les Hauts de Couëron III
4 rue des Entrepreneurs
44220 COUËRON

