

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you



Grosseron
Collection



POT À ANSE AMOVIBLE 80 - 125 - 180 ml GROSSERON COLLECTION

Idéal pour le **prélèvement d'échantillons liquides** pour une analyse dans le même pot, éliminant ainsi tout risque de **contamination croisée**. Il existe deux hauteurs de prélèvement possible avec l'anse télescopique et deux positions différentes (horizontale ou verticale). Les pots sont livrés en **position verticale**.

L'ensemble **pot, anse et bouchon** est entièrement **bleu** pour un usage sur des **lignes de production en agro-alimentaire**.

Les pots sont en polypropylène et le **bouchon inviolable à vis** est en **polyéthylène bleu** pour permettre de **sécuriser votre échantillon** après le **prélèvement**.



Étanche pour toutes les utilisations



Graduation dans la masse en ml et oz



Packaging avec **poignées**



Pas de zone de **rétenion**



Hauteur de la anse (sans le pot) 245 à 345 mm



Stérilisation par ionisation à 25 kGy




Traçabilité de chaque pot par marquage laser du n° de lot et de la date de péremption.



Cape inviolable préviscée : L'utilisateur enclenche la bague d'invocabilité en vissant la cape après le prélèvement.



La anse amovible permet de sélectionner la version longue ou courte pour le prélèvement.

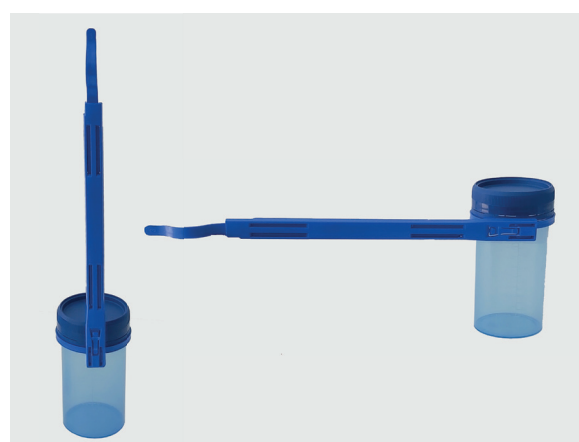

La anse amovible permet de sélectionner la version horizontale ou verticale pour le prélèvement.



La anse amovible est coincée dans la bague d'invocabilité ce qui assure un excellent maintien du pot pendant le prélèvement.



Après le prélèvement, la anse est chassée de son emplacement en vissant le bouchon.

RÉFÉRENCE	VOLUME UTILE ML	DIMENSIONS H (POT/ANSE) X Ø MM	COULEUR POT & CAPE	CONDITIONNEMENT
GRSA080BB	80	285 / 385 x 51	■	135
GRSA125BB	125	300 / 400 x 51	■	135
GRSA180BB	180	320 / 420 x 51	■	135