

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you

Grosseron
Collection



POT À ANSE AMOVIBLE 80 - 125 - 180 ml GROSSERON COLLECTION

Idéal pour le **prélèvement d'échantillons liquides** pour une analyse dans le même pot, éliminant ainsi tout risque de **contamination croisée**. Il existe deux hauteurs de prélèvement possible avec l'anse télescopique et deux positions différentes (horizontale ou verticale). Les pots sont livrés en **position verticale**.

L'ensemble **pot, anse et bouchon** est entièrement **bleu** pour un usage sur des **lignes de production en agro-alimentaire**.

Les pots sont en polypropylène et le **bouchon inviolable à vis** est en **polyéthylène bleu** pour permettre de **sécuriser votre échantillon** après le **prélèvement**.



Étanche pour toutes les utilisations



Graduation dans la masse en **ml et oz**



Packaging avec **poignées**



Pas de zone de **rétenion**



Hauteur de la anse (sans le pot) **245 à 345 mm**



Stérilisation par ionisation à **25 kGy**




Traçabilité de chaque pot par marquage laser du n° de lot et de la **date de péremption**.



Cape inviolable prévisée : L'utilisateur enclenche la bague d'inviolabilité en vissant la cape après le prélèvement.



La **anse amovible** permet de sélectionner la version **longue ou courte** pour le prélèvement.

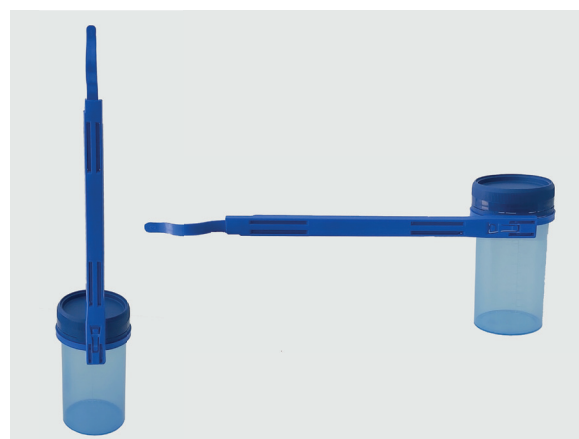

La **anse amovible** permet de sélectionner la version **horizontale ou verticale** pour le prélèvement.



La **anse amovible** est coincée dans la **bague d'inviolabilité** ce qui assure un excellent maintien du pot pendant le prélèvement.



Après le prélèvement, la **anse est chassée de son emplacement** en vissant le bouchon.

RÉFÉRENCE	VOLUME UTILE ML	DIMENSIONS H (POT/ANSE) X Ø MM	COULEUR POT & CAPE	CONDITIONNEMENT
GRSA080BB	80	285 / 385 x 51		135
GRSA125BB	125	300 / 400 x 51		135
GRSA180BB	180	320 / 420 x 51		135