

PROMO



Grosseron


being a part of you



VACUUBRAND®

GROUPE DE POMPAGE

GROUPE DE POMPAGE CHIMIE VACUUBRAND MD 1.5 MBAR

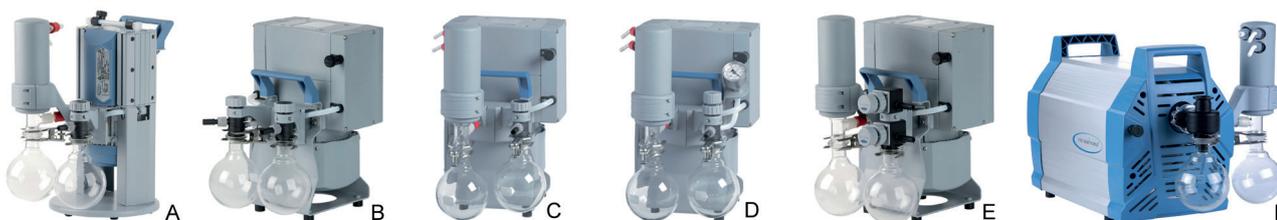

- > Vide limite jusqu'à 1.5 mBar
- > Spécial Chimie

VACUUBRAND propose des groupes de pompe pour la chimie complets, prêts au raccordement, équipés de pompe à membrane spéciale chimie optimale pour le débit et la gamme de vide souhaités.

AK : piège à condensat - côté aspiration ou refoulement, le ballon séparateur recueille les particules et les gouttellettes - un robinet d'arrêt

AK synchro : idem AK mais avec 2 robinets

EK : colonne de condensation en verre pour la condensation à pression atmosphérique des solvants pompés

M + D : manomètre et vanne de réglage manuel

Référence	Nom du groupe	Pompe incluse dans le groupe	Equipement du groupe	Débit	Vide limite	Dimensions (l x p x h)	Repère	Prix €HT
G210948	MD4CNT+AK+EK	MD 4C NT	1xAK à l'entrée + EK en sortie	3.4 m ³ /h	1.5 mBar	326x243x402 mm	C	4290,00

GROUPE DE POMPAGE CHIMIE VACUUBRAND MZ 7 MBAR



- > Vide limite jusqu'à 7 mBar
- > Spécial Chimie

Offres promotionnelles valables jusqu'au **30/06/2025**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON

PROMO



Grosseron

being a part of you

VACUUBRAND®

GRUPE DE POMPAGE CHIMIE VACUUBRAND MZ 7 MBar (SUITE)

VACUUBRAND propose des groupes de pompe pour la chimie complets, prêts au raccordement, équipés de pompe à membrane spéciale chimie optimale pour le débit et la gamme de vide souhaités.

AK : piège à condensat - coté aspiration ou refoulement : le ballon séparateur recueille les particules et les gouttelettes - un robinet d'arrêt

AK synchro : idem AK mais avec 2 robinets

EK : colonne de condensation en verre pour la condensation à pression atmosphérique des solvants pompés

M + D : manomètre et vanne de réglage manuel

Référence	Nom du groupe	Pompe incluse dans le groupe	Equipement du groupe	Débit	Vide limite	Dimensions (l x p x h)	Prix € HT
G210903	MZ2CNT+AK+EK	MZ 2C NT	1xAK à l'entrée + EK en sortie	2.0 m3/h	7 mBar	326x243x402 mm	2610,00

GRUPE DE POMPAGE VACUUBRAND VARIO CHIMIE À RÉGULATION DIGITALE



- > Spécial Chimie
- > Régulation de vide par variation de vitesse
- > Interface utilisateur tactile couleur Select

Le groupe de pompage VARIO Select régule le vide précisément par variation de la vitesse moteur. La régulation de vide intégrée peut mener automatiquement les évaporations en un seul clic. Grâce à la variation de vitesse, la pompe ne travaille que lorsque nécessaire. Par conséquent le niveau de bruit très bas est appréciable dans un laboratoire.

L'interface Select : **Une simplicité synonyme de gain de temps**

- fonctionnement confortable via écran tactile
- Process de vide prêt à l'emploi pour toutes les applications de laboratoire courantes
- Création facile d'applications personnalisées
- Evaporation automatique par une pression sur une touche

Référence	Nom du groupe	Type de condenseur	Débit	Vide limite	Dimension (LxPxH) mm	Repère	Prix € HT
G210947	PC 3001 VARIO Select	Carboglace	2.0 m3/h	2.0 mBar	303 x 306 x 400	A	4910,00
G210949	PC 3004 VARIO Select	Eau	4.6 m3/h	1.5 mBar	303 x 306 x 400	C	6850,00



Offres promotionnelles valables jusqu'au **30/06/2025**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON